




# Tubbease®

*La ayuda definitiva para el tratamiento de las pezuñas equinas*

**Nueva y mejorada**  
ahora hecho con EVA

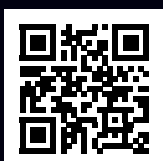

Escanee aquí para obtener más información o visite  
[www.shoofint.com/tubbease](http://www.shoofint.com/tubbease)

## Características:

- EVA suave y moldeable con calor
- Calcetín transpirable
- Toma remedios en polvo, crema y líquidos
- Cierre de gancho y bucle
- Inserciones opcionales para suelas sensibles.

## Beneficios:

- Sencillo y rápido de usar
- Ajuste firme y cómodo
- Desperdicio mínimo
- Los cascos permanecen limpios y protegidos
- Ayuda a una recuperación más rápida

# Los calcetines Tubbease Hoof son lo último en ayuda para el tratamiento de una variedad de problemas de cascos.

Remojar y vendar los cascos puede resultar difícil, llevar mucho tiempo y ser estresante, pero Tubbease es simple y efectivo para que cualquiera pueda usarlo y puede usarse junto con vendajes, medicamentos y cataplasmas.

Ahora fabricados con EVA, son más ligeros, más flexibles, absorben los golpes y se moldean con calor. Esto permite un ajuste cómodo y ceñido para su caballo o pony.



## Excelente para tratar una amplia variedad de dolencias de los cascos.

Trate abscesos e infecciones, plantas de los pies magulladas, aftas, laminitis, enfermedad de la línea blanca y más.



## Úselo con remedios en polvo, crema o líquidos.

Minimiza el desperdicio y rellena según sea necesario. Tubbease, una vez colocado en el casco, también se puede sumergir en un balde con la solución de su elección para absorber los remedios (pero no dejarlo en el balde). No es necesario aplicar vendajes ni cintas extensas.



## Proporcionar protección y limpieza adicionales.

Tubbease proporciona un entorno higiénico y protegido para que el casco sane, también son transpirables, lo que acelera el tiempo de recuperación. Se pueden usar apósitos y colocarlos dentro del Tubbease.



## Moldeable por calor

Tubbease se puede calentar en agua a 60° y colocarlo en el casco para que se enfríe; se moldeará como un protector bucal, proporcionando un ajuste aún más cómodo y ceñido. También se recomienda utilizar el moldeo por calor cuando el casco esté cerca del tamaño máximo indicado para cada Tubbease.



## Protección adicional cuando la necesitas

Tubbease absorbe los impactos y el inserto de suela de EVA opcional proporciona aún más amortiguación cuando es necesario. También son ideales para proteger los cascos mientras se viaja en flotador o cuando se cae un zapato.



## Diseñado y fabricado en Nueva Zelanda

Desarrollados en colaboración con un herrador local, Tubbease es sencillo y rápido de usar, lo que elimina el estrés y el tiempo que supone el tratamiento de las pezuñas.




## El accesorio definitivo en tu kit veterinario equino

Tubbease es la mejor incorporación a su equipo equino para garantizar que pueda tratar la cojera temprana y acelerar el tiempo de recuperación. Localice ahora a su distribuidor Tubbease más cercano para realizar la compra. 5 tamaños e inserciones a juego disponibles.



# Instrucciones de uso

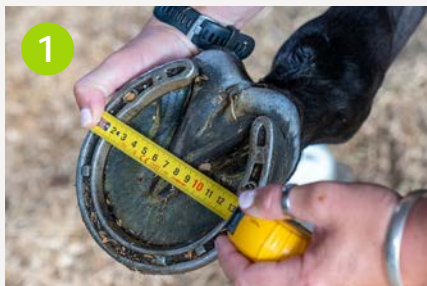

1

## Mide el casco

Mide la suela del casco del caballo en el punto más ancho y elige el color a continuación que combine dentro de ese tamaño. El ajuste del calcetín debe ser lo más cercano posible al casco. Tubbease se puede colocar sobre herraduras. Las medidas siguientes indican el diámetro interno máximo del Tubbease, no el diámetro del casco.



2

## Moldeo por calor del Tubbease

Optimice el ajuste calentando Tubbease antes de aplicarlo en el casco. Esto es muy recomendable para un ajuste cómodo y ceñido, especialmente cerca del tamaño máximo indicado para cada Tubbease. Ablanda en agua a 50-60°C durante 30 segundos, luego moldea la pezuña mientras la levantas durante 1 minuto. Esto también hará que sea flexible y más fácil de colocar en el casco.



3

## Para colocar el Tubbease

Estire el calcetín hasta el ancho de la pezuña y se deslizará. Mueva la bota hacia atrás para que la punta quede justo al frente, luego los talones encajarán fácilmente.



4

## Coloque la correa de velcro


Levanta el calcetín y estíralo positivamente; no querrás que el calcetín quede holgado. Coloque la correa de velcro, con el lado del gancho hacia el calcetín, bien ajustado, asegurándose de que el calcetín no quede suelto debajo de la correa de velcro y que la correa esté bien apretada. La correa debe mantener la tensión sobre el calcetín pero no restringir la circulación. Dos dedos deberían poder pasar por la parte posterior del velcro.



5

## Verter la solución en el Tubbease

Simplemente puede verter la solución que prefiera en el Tubbease (dirigido a la parte del calcetín) una vez que esté puesto, y agregar más según sea necesario O sumergir el casco, con el Tubbease puesto, en un balde de solución.

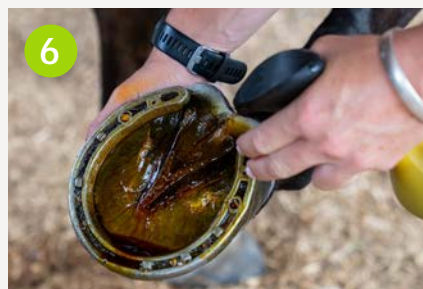

6

## Proteger la medicación

Proteger la medicación En los momentos en que el casco necesite medicación y protección, basta con aplicar la medicación elegida y luego proteger con el calcetín Tubbease.



7

## Remojar la pezuña

Si desea utilizar un vendaje para ayudar a mantener la solución en el casco, puede hacerlo empapando el vendaje en la solución de su elección y luego simplemente colóquelo en el Tubbease según las instrucciones.



8

## Inserciones de suela disponible para cuando se requiere acolchado adicional para tratamiento y comodidad:

simplemente haga coincidir el color del inserto con el color del calcetín y colóquelo en el Tubbease antes de colocarlo en el casco del caballo.

## Gama de productos

Tenga en cuenta que las dimensiones a continuación indican el diámetro interno máximo del Tubbease, no el diámetro del casco. Tubbease también se puede colocar sobre herraduras.



Amarillo - 175mm (7 inches)



Azul - 160mm (6 1/4 inches)



Rojo - 145mm (5 1/2 inches)



Verde - 130mm (5 1/8 inches)



Rosa - 110mm (4 1/2 inches)

## Inserciones de suela



## Correas de velcro



## Tenga en cuenta:

- Los Tubbease no están diseñados para caminar ni para usarse sobre un caballo mientras se está montando.
- Los Tubbease no son para uso a largo plazo: están diseñados para usarse durante 5 a 7 días junto con el tratamiento, pero se controlan diariamente
- Son un artículo de vida limitada PERO si se tiene cuidado, pueden reutilizarse a su discreción. Un inserto también ayudará a prolongar la vida útil del Tubbease.