

Hybrid Foam Block

INSTRUCTION BOOKLET

Walkease Hybrid Foam Blocks are the fast, cost-effective solution for managing moderate lameness in cattle.

Attaching a Walkease Hybrid Foam Block to the healthy claw provides elevation for the injured claw, promoting healing by minimising weight bearing and pressure. With no removal required, Walkease Hybrid Foam Blocks speed up recovery and mobility keeping your herd productive.

ENGLISH	1	FRANÇAIS	6	NEDERLANDS	11	SUOMI	16
中文	2	ITALIANO	7	NORSK	12	SVENSKA	17
DANSK	3	日本語	8	POLSKI	13	TÜRKÇE	18
DEUTSCH	4	LIETUVIŲ	9	PORTUGUÊS	14		
ESPAÑOL	5	MAGYAR	10	РУССКИЙ	15		



Always use with Walkease Rapid Glue for best results.

Shoof Lameness Scale

A cow's lameness is assessed on a scale of 0 – 3, with 0 representing a normal walk and 3 indicating a severely lame cow.

Assessment is based on indicators such as walking speed, rhythm, stride length, weight bearing, back alignment, and head movement.

Score	Action	Walkease Foam Blocks	Walkease Hybrid Blocks	Walkease Wooden Blocks	Hoofers Cow Clogs
0 No Lameness	Walks evenly, no action required				
1 Mild Lameness	Minor action required, monitor	✓			
2 Moderate Lameness	Action required, examine within 24 hours		✓	✓	
3 Severe Lameness	Urgent action required, treat immediately				✓



Need help? We're here for you.

New Zealand: Shoof International Ltd. 224 Laurent Road North, Cambridge 3493, New Zealand. Ph 0800 800 801

Australia: Shoof International Pty Ltd. 1 International Square, Tullamarine VIC 3043, Australia. Ph 1800 121 801

Chile: Shoof International Chile Ltda. Loteo Las 7 Colinas, Fundo el Castillo, Lote N° 15, Barrio Industrial Osorno, Chile. Ph 800 600 000

www.shoofint.com/walkease

Shoof® and Walkease® are registered trademarks of Shoof International Ltd.



Scan to view Video

Walkease®: Trusted hoof care solutions

Proudly designed and developed in New Zealand by Shoof.

Walkease Hybrid Foam Blocks are made with a specially-formulated ethylene-vinyl acetate (EVA) foam outer and wooden core. EVA offers a lightweight, flexible construction with superior shock absorption and long-lasting durability. The wooden core provides superior elevation and lasts up to 28 days. They are attached to the hoof by using Walkease Rapid Glue and can be used on either the left or right claw. Walkease Hybrid Foam Blocks are low-cost and easy to apply. Special skill and experience are not required. The directions in this instruction booklet must be adhered to. Any deviation from these instructions will likely result in failure of the adhesive.

Walkease Hybrid Foam Blocks are intended for use to repair hoof injuries resulting in moderate lameness. They are ideal for the recovery of such ailments as thin soles, and other conditions needing about 2 - 4 weeks of elevation.

Walkease Rapid Glue is different to most other hoof-block adhesives. The natural moisture in the hoof and in the atmosphere is required to activate the glue. **The hoof must not be artificially dried (hot air or alcohol).** In very cold weather, when the air is very dry, more time might be required to activate the glue. (Breathing closely on the glued surface a few times before application to the hoof will help.)

To maintain shelf life the glue should be stored in a refrigerator. Remove from the fridge prior to use. The glue is best used at about room or body temperature.

Fitting procedure:

Treatment of the injured claw must be completed, then the healthy claw is prepared for fitting the block. The Walkease rasp should be used to finish the hoof surface regardless of what other tools may have been used to prepare the hoof. This rasp provides the correct clean and flat surface for the Walkease Hybrid Foam Block to adhere to. The rasp must be kept clean.

Handle the Walkease Hybrid Foam Block carefully ensuring the gluing face is kept clean. Test the block for size and shape on the hoof. Choose the correct size that will support all of the hoof wall, but without creating any large overlap.

Always wear gloves when handling Walkease Rapid Glue. Apply glue using the full contents of the 2 mL single-use tube to secure the block. After about 10 seconds of steady pressure you will feel the block 'grip'. (Possibly longer in cold weather). Promptly after 'grip', lower the hoof so the animal can put full weight on the block to complete the bond. The Walkease Hybrid Foam Block will not attach properly if weight is not applied before the glue has completely cured.

The glue sets very quickly under the animal's weight. The excess glue is squeezed out and the block conforms to the hoof surface. This improves the surface area contact giving a stronger bond. In cold weather the bond time may increase

a little, so give the animal a bit longer standing on the block before releasing it from the crush.

Walkease Hybrid Foam Blocks do not generally need to be removed. They erode naturally after 2 - 4 weeks.

Extra blocks and glue can be ordered through your ShooF dealer.



Fig 1. Treat the injured claw as required.

Fig 2. Use the rasp to prepare the adjacent claw for gluing.

Fig 3. Apply full tube of glue to the Walkease Hybrid Foam Block.

Fig 4. Press the block firmly onto the healthy claw, overlapping the hoof wall.

Fig 5. Promptly drop the leg for the cattle to put weight on the block.

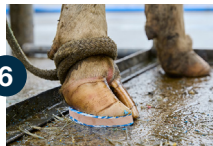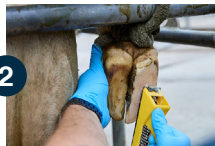

Walkease混合泡沫块由专门配方的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)泡沫外层和木质核心制成。EVA提供轻质、灵活的结构,具有优越的减震性能和持久的耐用性。木质核心提供优越的升高效果,并且能够持续使用长达28天。它们通过Walkease快速胶水附着在蹄部,并可用于左蹄或右蹄。Walkease混合泡沫块具有低成本且易于应用的特点,不需要特殊的技能或经验。必须遵循本说明书中的指示。任何偏离这些指示的操作都可能导致胶水粘接失败。

沃尔奇混合泡沫蹄块适用于修复导致中度跛行的蹄部损伤,特别适合用于薄蹄底等需要约 2-4 周抬高治疗的状况的康复。

沃克易速效胶(Walkease Rapid Glue)与大多数其他蹄块黏合剂不同。蹄部及空气中的自然湿气是激活胶水所必需的。蹄部不得被人工干燥(如热风或酒精处理)。在空气非常干燥的严寒天气中,胶水可能需要更长时间才能被激活。(在涂胶表面上方轻轻哈气数次再贴于蹄部会有所帮助。)

为保持保质期,胶水应存放在冰箱中。使用前从冰箱取出。胶水在接近室温或体温时效果最佳。

使用步骤:

受伤蹄趾的处理必须先完成,然后再对健康蹄趾进行准备以安装蹄块。无论事先使用过什么工具来修整蹄部,都必须使用 Walkease 锉刀对蹄面进行最终处理。该锉刀能够提供适合 Walkease 混合泡沫蹄块黏附的、清洁且平整的表面。锉刀必须保持清洁。

处理 Walkease 混合泡沫蹄块时要小心,确保黏合面保持清洁。将蹄块放在蹄部试配其尺寸和形状。选择能够支撑整个蹄壁、但不会产生明显重叠的正确尺寸。

处理 Walkease 速效胶时必须佩戴手套。使用 2 毫升一次性胶管中的全部胶水将蹄块牢固黏贴。施加大约 10 秒的持续压力后,你会感觉到蹄块开始“抓附”(在寒冷天气中可能需要更长时间)。在“抓附”刚开始后,应立即放下蹄子,让动物将全部体重压在蹄块上,以完成黏结。如果在胶水完全固化前没有让蹄子承重, Walkease 混合泡沫蹄块将无法正确黏附。

在动物体重的压迫下,胶水会非常快速地固化。多余的胶水会被挤出,蹄块会贴合蹄面,从而增大接触面积,提供更牢

固的黏结。在寒冷天气中,黏结时间可能会稍有增加,因此应让动物在蹄块上多站一会儿,再从挤压架中释放。

Walkease 混合泡沫蹄块通常不需要人工拆除,它们会在 2-4 周后自然磨损消失。

额外的泡沫块和快速胶可以通过您的 ShooF 经销商订购。

图1 按要求处理受伤脚爪。


图2 用锉刀为相邻脚爪做好涂胶的准备。

图3 将整管胶水涂抹在 Walkease 混合泡沫蹄块上。

图4 将 Walkease 蹄块牢牢地按压在相邻的蹄子上,确保覆盖蹄壁。

图5 立即放下蹄子,让牛将体重压在 Walkease 泡沫块上。

注: 参看首页表格里的“按压”时间。

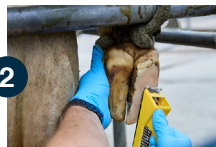

Walkease Hybrid Foam Blocks er lavet med et specielt formuleret ethylen-vinylacetat (EVA) skum ydre og en trækerne. EVA tilbyder en let og fleksibel konstruktion med overlegen stødabsorption og langvarig holdbarhed. Trækernen giver overlegen hævnning og varer i op til 28 dage. De fastgøres til hoven ved hjælp af Walkease Rapid Glue og kan bruges på både venstre og højre klo. Walkease Hybrid Foam Blocks er lavpris og nemme at anvende. Der kræves ikke specielle færdigheder eller erfaring. Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Enhver afvigelse fra disse instruktioner vil sandsynligvis medføre svigt i limen.

Walkease Hybrid Foam Blocks er beregnet til reparation af hovskader, der medfører moderat halthed. De er ideelle til heling af problemer såsom tynde såler og andre tilstande, der kræver cirka 2–4 ugers forhøjelse.

Walkease Hurtig Lim adskiller sig fra de fleste andre hovbloklimer. Den naturlige fugtighed i hoven og i luften er nødvendig for at aktivere limen. **Hoven må ikke tørres kunstigt (f.eks. med varm luft eller alkohol).** I meget koldt vejr, når luften er meget tør, kan det kræve længere tid at aktivere limen. (At ånde nært på den limerede overflade et par gange før påføring på hoven vil hjælpe.)

For at bevare holdbarheden bør limen opbevares i et køleskab. Tag den ud af køleskabet før brug. Limen bruges bedst ved cirka stuetemperatur eller kropstemperatur.

Monteringsprocedure:

Behandlingen af den skadede klo skal være færdig, før den sunde klo forberedes til montering af blokken. Walkease filen bør bruges til at afslutte hovens overflade, uanset hvilke andre værktøjer der måtte være brugt til at forberede hoven. Denne fil giver den korrekte, rene og flade overflade, som Walkease Skumblokken kan binde sig til. Filen skal holdes ren.

Håndter Walkease Hybrid Skumblokken forsigtigt og sørg for, at limfladen holdes ren. Test blokken for størrelse og form på hoven. Vælg den korrekte størrelse, der understøtter hele hovvæggen, men uden at skabe nogen stor overlappning.

Brug altid handsker, når du håndterer Walkease Hurtig Lim. Påfør limen ved at bruge hele indholdet af den 2 mL engangspakning for at sikre blokken. Efter cirka 10 sekunders konstant tryk vil du mærke, at blokken 'griber'. (Måske længere tid i koldt vejr). Straks efter 'grebet', sænk hoven, så dyret kan lægge fuld vægt på blokken for at fuldføre forbindelsen. Walkease Hybrid Skumblokken vil ikke fastgøres korrekt, hvis vægt ikke påføres, før limen er helt hærdet.

Limen hærdet meget hurtigt under dyrets vægt. Den overskydende lim presses ud, og blokken tilpasser sig hovens

overflade. Dette forbedrer overfladekontakten og giver en stærkere binding. I koldt vejr kan hærdetiden øges en smule, så giv dyret lidt længere tid til at stå på blokken, før du slipper det fra knusen. Walkease Hybrid Skumblokke behøver normalt ikke at blive fjernet. De nedbrydes naturligt efter 2 - 4 uger.

Ekstra blokke og lim kan bestilles gennem din Shoof-forhandler.

Fig. 1. Behandl den skadede klo efter behov.


Fig. 2. Brug raspen til at forberede den tilstødende klo til limning.

Fig. 3. Påfør hele tuben lim på Walkease Hybrid Skumblokken

Fig. 4. Tryk blokken fast på den sunde klo, så den overlapper hovvæggen.

Fig. 5. Sænk straks benet, så dyret kan lægge vægt på blokken.

NB: Se 'Grebstid' diagram på forsiden.

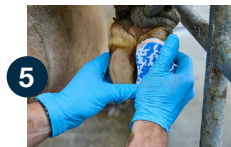

Walkease Hybrid-Schaumstoffblöcke bestehen aus einem speziell formulierten Ethylen-Vinylacetat (EVA) Schaumstoff-Äußeren und einem Holz-Kern. EVA bietet eine leichte, flexible Konstruktion mit überlegener Stoßdämpfung und langanhaltender Haltbarkeit. Der Holz-Kern sorgt für eine erhöhte Stabilität und hält bis zu 28 Tage. Sie werden mit Walkease Rapid Glue am Huf befestigt und können sowohl auf der linken als auch auf der rechten Klaue verwendet werden. Walkease Hybrid-Schaumstoffblöcke sind kostengünstig und einfach anzuwenden. Es sind keine speziellen Fähigkeiten oder Erfahrungen erforderlich. Die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung müssen befolgt werden. Jede Abweichung von diesen Anweisungen führt wahrscheinlich zu einem Versagen des Klebers.

Walkease Hybrid-Schaumblöcke sind zur Behandlung von Hufverletzungen vorgesehen, die zu mäßiger Lahmheit führen. Sie eignen sich ideal für die Genesung bei Erkrankungen wie dünnen Hufsohlen sowie anderen Zuständen, die etwa 2–4 Wochen Erhöhung erfordern.

Walkease Rapid Glue unterscheidet sich von den meisten anderen Hufblock-Klebstoffen. Die natürliche Feuchtigkeit im Huf und in der Umgebungsluft ist erforderlich, um den Klebstoff zu aktivieren. **Der Huf darf nicht künstlich getrocknet werden (Heißluft oder Alkohol).** Bei sehr kaltem Wetter, wenn die Luft sehr trocken ist, kann es länger dauern, bis der Klebstoff aktiviert wird. (Mehrmaliges nahes Einatmen auf die zu klebende Fläche vor der Anwendung am Huf kann helfen.)

Om de houdbaarheid te behouden, moet de lijm in een koelkast worden bewaard. Haal de lijm uit de koelkast vóór gebruik. De lijm werkt het best bij ongeveer kamer- of lichaamstemperatuur.

Blockfixierung:

Die Behandlung der verletzten Klaue muss abgeschlossen sein, bevor die gesunde Klaue für das Anbringen des Blocks vorbereitet wird. Die Walkease-Raspel sollte verwendet werden, um die Hufoberfläche fertigzustellen, unabhängig davon, welche anderen Werkzeuge zur Vorbereitung des Hufs verwendet wurden. Diese Raspel sorgt für eine saubere und ebene Fläche, an der der Walkease Hybrid-Schaumstoffblöcke haftet. Die Raspel muss sauber gehalten werden.

Handhaben Sie den Walkease Hybrid-Schaumstoffblöcke vorsichtig und achten Sie darauf, dass die Klebefläche sauber bleibt. Prüfen Sie den Block auf Größe und Form am Huf. Wählen Sie die richtige Größe, die die gesamte Hufwand unterstützt, ohne große Überlappungen zu erzeugen.

Tragen Sie stets Handschuhe beim Umgang mit Walkease Rapid Glue. Tragen Sie den Klebstoff mit dem gesamten Inhalt der 2-mL-Einweg-Tube auf, um den Block zu sichern. Nach etwa 10 Sekunden gleichmäßigem Druck spüren Sie, wie der Block „greift“ (bei kaltem Wetter möglicherweise etwas länger). Senken Sie unmittelbar nach dem „Greifen“ den Huf, damit das Tier das volle Gewicht auf den Block bringen kann, um die Verbindung zu vervollständigen. Der Walkease Hybrid-

Schaumstoffblöcke haftet nicht richtig, wenn kein Gewicht aufgebracht wird, bevor der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.

Der Klebstoff härtet unter dem Gewicht des Tieres sehr schnell aus. Überschüssiger Klebstoff wird herausgedrückt und der Block passt sich der Hufoberfläche an. Dies verbessert die Kontaktfläche und sorgt für eine stärkere Verbindung. Bei kaltem Wetter kann die Aushärtezeit etwas länger dauern, lassen Sie das Tier daher etwas länger auf dem Block stehen, bevor Sie es aus dem Standkorb entlassen.

Walkease Hybrid-Schaumstoffblöcke müssen in der Regel nicht entfernt werden. Sie nutzen sich nach 2–4 Wochen von selbst ab. Zusätzliche Blöcke und Klebstoff können über Ihren Shooof-Händler bestellt werden.

Fig 1. Die verletzte Krallen nach Bedarf behandeln.


Fig 2. Verwenden Sie die Raspel, um die gesunde Klaue für den Kleber vorzubereiten

Fig 3. Tragen Sie die gesamte Tube Klebstoff auf den Walkease Hybrid-Schaumstoffblöcke auf.

Fig 4. Drücken Sie den Block fest auf die Klaue, sodass er die Hufwand überlappt.

Fig 5. Lassen Sie die Kuh den Fuß sofort durch Auftreten mit dem Eigengewicht belasten.

Anm.: Siehe „Haftungszeit“-Diagramm auf der Titelseite.

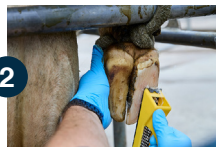

Los Bloques de Espuma Híbridos Walkease están fabricados con una capa exterior de espuma de etileno-vinil-acetato (EVA) especialmente formulada y un núcleo de madera. El EVA ofrece una construcción ligera y flexible con una excelente absorción de impactos y una durabilidad prolongada. El núcleo de madera proporciona una elevación superior y dura hasta 28 días. Se fijan al casco utilizando el adhesivo rápido Walkease y se pueden usar tanto en la garra izquierda como en la derecha. Los Bloques de Espuma Híbridos Walkease son de bajo costo y fáciles de aplicar. No se requieren habilidades o experiencia especial. Se deben seguir estrictamente las instrucciones de este manual. Cualquier desviación de estas instrucciones probablemente resultará en el fallo del adhesivo.

Los bloques de espuma híbridos Walkease están diseñados para reparar lesiones en la pezuña que causen cojera moderada. Son ideales para la recuperación de afecciones como suelas finas y otras condiciones que requieren aproximadamente 2 a 4 semanas de elevación.

El pegamento Walkease Rápido es diferente a la mayoría de los otros adhesivos para bloques de pezuña. La humedad natural en la pezuña y en la atmósfera es necesaria para activar el pegamento. **La pezuña no debe ser secada artificialmente (aire caliente o alcohol).** En climas muy fríos, cuando el aire es muy seco, podría ser necesario más tiempo para activar el pegamento. (Respirar un par de veces sobre el bloque con pegamento, antes de su aplicación a la pezuña, puede aumentar el nivel de humedad y ayudar a la adherencia).

Para mantener su vida útil, el pegamento debe almacenarse en un refrigerador. Sáquelo del refrigerador antes de usarlo. El pegamento se utiliza mejor a una temperatura cercana a la ambiente o corporal.

Procedimiento de ajuste:

Tratamiento de la pezuña debe ser completo y luego prepararla para usar el bloque.

La lima de pezuñas Walkease puede usarse para terminar la superficie de la pezuña sin importar qué otras herramientas se han utilizado para prepararla.

Esta lima proporciona una superficie correcta, limpia y plana para el uso del bloque Walkease. La lima debe mantenerse siempre limpia.

Maneje el bloque Walkease Híbridos Espuma cuidadosamente para asegurar que la cara con pegamento se mantenga limpia. Pruebe el bloque adecuado para el tamaño y forma de la pezuña que necesita. Elija el tamaño correcto que cubrirá toda la pared de la pezuña, pero sin que sobresalga.

Utilice siempre guantes al manipular el pegamento Walkease Rápido. Aplique pegamento con moderación al bloque (máximo 2mL). No use pegamento excesivo. El uso de pegamento excesivo causará una falla. Presione firmemente el bloque sobre la pezuña. Después de unos 10 segundos de presión constante se sentirá el bloque firme. (Posiblemente más tiempo en climas fríos). Inmediatamente después baje la pezuña

para que el animal pueda poner todo el peso en el bloque y así completar el pegado. El bloque Walkease Híbridos Espuma no se instalará correctamente si no se aplica peso antes de que el pegamento seque.

El pegamento se fija muy rápidamente bajo el peso del animal. El exceso de pegamento es aplastado y el bloque se ajusta a la superficie de la pezuña. Esto mejora el contacto de la superficie dando un vínculo más fuerte. En clima frío, el tiempo de pegado puede aumentar un poco, por lo que es necesario dar un poco más de tiempo al animal sobre el bloque antes de soltarlo. Los bloques Walkease Híbridos Espuma generalmente no necesitan ser retirados. Ellos desaparecen naturalmente después de 2 a 4 semanas.

Puede solicitar pegamento y bloques adicionales a través de los distribuidores de Shoof.

Fig 1. Trate la pezuña herida como se requiera.


Fig 2. Use la Lima para preparar la pezuña para luego colocar el pegamento.

Fig 3. Aplique pegamento con moderación al bloque Walkease Híbridos Espuma.

Fig 4. Presione el bloque firmemente en la pezuña sana, traslapando la pared.

Fig 5. Posteriormente soltar la pata de la vaca para poner su peso sobre el bloque.

Nota: ver la tabla de tiempo de pegado en la página frontal.

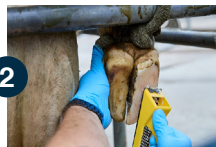

Les blocs en mousse hybride Walkease sont fabriqués avec un revêtement en mousse éthylène-vinyl-acétate (EVA) spécialement formulée et un noyau en bois. L'EVA offre une construction légère et flexible avec une excellente absorption des chocs et une durabilité à long terme. Le noyau en bois procure une élévation supérieure et dure jusqu'à 28 jours. Ils sont fixés au sabot à l'aide de la colle rapide Walkease et peuvent être utilisés sur le sabot gauche ou droit. Les blocs en mousse hybride Walkease sont peu coûteux et faciles à appliquer. Aucune compétence ou expérience particulière n'est requise. Les instructions de ce manuel doivent être suivies à la lettre. Toute déviation par rapport à ces instructions risque de provoquer un échec de l'adhésif.

Les blocs hybrides en mousse Walkease sont conçus pour réparer les lésions du sabot entraînant une boiterie modérée. Ils sont idéaux pour la récupération d'affections telles que les soles fines ou d'autres conditions nécessitant environ 2 à 4 semaines d'élévation.

La colle rapide Walkease diffère de la plupart des autres adhésifs pour blocs de sabot. L'humidité naturelle du sabot et de l'air ambiant est nécessaire pour activer la colle. **Le sabot ne doit pas être séché artificiellement (air chaud ou alcool).** Par temps très froid, lorsque l'air est très sec, il peut falloir plus de temps pour activer la colle. (Respirer plusieurs fois près de la surface collée avant l'application sur le sabot peut aider.)

Pour conserver sa durée de vie, la colle doit être stockée au réfrigérateur. Sortez-la du réfrigérateur avant utilisation. La

colle s'utilise de préférence à une température proche de la température ambiante ou corporelle.

Mode d'emploi :

Le traitement de la griffe blessée doit être terminé, puis la griffe saine doit être préparée pour la pose du bloc. La râpe Walkease doit être utilisée pour finir la surface du sabot, quel que soit l'outil utilisé précédemment pour préparer le sabot. Cette râpe assure une surface propre et plane adéquate pour que le bloc de mousse hybrides Walkease adhère correctement. La râpe doit être maintenue propre.

Manipulez le bloc de mousse hybrides Walkease avec précaution, en veillant à ce que la face à coller reste propre. Testez le bloc sur le sabot pour vérifier la taille et la forme. Choisissez la taille appropriée qui soutiendra toute la paroi du sabot, sans créer de chevauchement important.

Portez toujours des gants lors de la manipulation de la colle rapide Walkease. Appliquez la colle en utilisant l'intégralité du tube à usage unique de 2 mL pour fixer le bloc. Après environ 10 secondes de pression constante, vous sentirez le bloc « accrocher » (cela peut prendre un peu plus de temps par temps froid). Immédiatement après que le bloc ait « accroché », abaissez le sabot pour que l'animal puisse mettre tout son poids sur le bloc afin de compléter la fixation. Le bloc de mousse

hybrides Walkease ne s'attachera pas correctement si le poids n'est pas appliqué avant que la colle ne soit complètement durcie.

La colle durcit très rapidement sous le poids de l'animal. L'excédent de colle est expulsé et le bloc épouse parfaitement la surface du sabot. Cela augmente la surface de contact, offrant ainsi une fixation plus solide. Par temps froid, le temps de prise peut être légèrement plus long, laissez donc l'animal se tenir un peu plus longtemps sur le bloc avant de le relâcher de l'enclos.

Les blocs de mousse hybrides Walkease n'ont généralement pas besoin d'être retirés. Ils s'usent naturellement après 2 à 4 semaines.

Des blocs supplémentaires et de la colle peuvent être commandés auprès de votre revendeur Shooof.

Fig 1. Nettoyer et soigner l'onglon blessé.


Fig 2. Utiliser la râpe pour préparer l'onglon adjacent.

Fig 3. Appliquez le tube de colle entier sur le bloc de mousse hybrides Walkease.

Fig 4. Enfoncez fermement le bloc sur la griffe saine, en le faisant chevaucher la paroi du sabot.

Fig 5. Relâcher aussitôt la patte, ainsi la vache peut appliquer tout son poids sur la talonnette

Remarque : veuillez consulter le tableau 'Temps d'adhérence' de la première page.

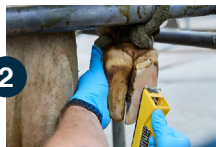

I Blocchi in Schiuma Ibrida Walkease sono realizzati con uno strato esterno di schiuma di etilene-vinil-acetato (EVA) appositamente formulato e un nucleo in legno. L'EVA offre una costruzione leggera e flessibile, con un'eccezionale capacità di assorbimento degli urti e una durabilità a lungo termine. Il nucleo in legno fornisce una elevazione superiore e dura fino a 28 giorni. Vengono attaccati allo zoccolo utilizzando la Colla Rapida Walkease e possono essere utilizzati sia sulla zampa sinistra che su quella destra. I Blocchi in Schiuma Ibrida Walkease sono economici e facili da applicare. Non sono necessarie abilità o esperienze particolari. Le istruzioni contenute in questo manuale devono essere seguite alla lettera. Qualsiasi deviazione da queste istruzioni probabilmente causerà il fallimento dell'adesivo.

I blocchi in schiuma ibrida Walkease sono pensati per riparare lesioni allo zoccolo che causano zoppia moderata. Sono ideali per il recupero da condizioni come suole sottili e altre situazioni che richiedono circa 2-4 settimane di sollevamento.

Colla Rapida Walkease è diversa dalla maggior parte degli altri adesivi per blocchi da zoccolo. L'umidità naturale dello zoccolo e dell'atmosfera è necessaria per attivare la colla. **Lo zoccolo non deve essere essiccato artificialmente (con aria calda o alcol).** In condizioni climatiche molto fredde, quando l'aria è molto secca, potrebbe essere necessario più tempo per attivare la colla. (Soffiare delicatamente sulla superficie incollata alcune volte prima dell'applicazione allo zoccolo aiuterà).

Per mantenerne la durata, la colla deve essere conservata in

frigorifero. Togliere dal frigorifero prima dell'uso. La colla dà i migliori risultati a una temperatura prossima a quella ambiente o corporea.

Modo d'uso:

Il trattamento della zampa danneggiata deve essere completato, quindi la zampa sana deve essere preparata per l'applicazione del blocco. La raspa Walkease deve essere utilizzata per rifinire la superficie dello zoccolo, indipendentemente dagli altri strumenti che potrebbero essere stati utilizzati per preparare lo zoccolo. Questa raspa fornisce la superficie pulita e piatta corretta per permettere al Blocchi di Schiuma Ibrida Walkease di aderire. La raspa deve essere mantenuta pulita.

Maneggiare con cura il Blocchi di Schiuma Ibrida Walkease, assicurandosi che la superficie per l'incollaggio rimanga pulita. Testare il blocco per dimensione e forma sullo zoccolo. Scegliere la dimensione corretta che supporti tutta la parete dello zoccolo, senza creare sovrapposizioni eccessive.

Indossare sempre guanti quando si maneggia la Colla Rapida Walkease. Applicare la colla usando l'intero contenuto del tubo monouso da 2 mL per fissare il blocco. Dopo circa 10 secondi di pressione costante, si sentirà il blocco che 'afferra'. (Possibilmente ci vorrà più tempo in caso di clima freddo). Subito dopo che il blocco ha 'afferrato', abbassare lo zoccolo affinché l'animale possa mettere il peso completo sul blocco per completare la legatura. Il Blocchi di Schiuma Ibrida Walkease non si attaccherà

correttamente se il peso non viene applicato prima che la colla si sia completamente indurita.

La colla si indurisce molto rapidamente sotto il peso dell'animale. L'eccesso di colla viene espulso e il blocco si adatta alla superficie dello zoccolo. Questo migliora il contatto della superficie, creando una connessione più forte. In climi freddi, il tempo di adesione potrebbe aumentare leggermente, quindi lasciare l'animale in piedi sul blocco un po' più a lungo prima di rilasciarlo dalla trappola. Il Blocchi di Schiuma Ibrida Walkease generalmente non necessitano di essere rimossi. Si erodono naturalmente dopo 2 - 4 settimane.

I blocchi e la colla aggiuntivi possono essere ordinati tramite il vostro rivenditore Shoof.

Fig. 1. Trattare la zampa danneggiata come richiesto.

Fig. 2. Usare la raspa per preparare la zampa adiacente per l'incollaggio.

Fig. 3. Applicare l'intero tubo di colla al Blocchi di Schiuma Ibrida Walkease.

Fig. 4. Premere saldamente il blocco sulla zampa sana, sovrapponendo la parete dello zoccolo.

Fig. 5. Abbassare prontamente la zampa affinché il bestiame possa mettere il peso sul blocco.

NB: vedere la tabella di 'stringere Time' in prima pagina



WALKEASEハイブリッドフォームブロックは、特別に配合されたエチレン-ビニルアセテート (EVA) フォームの外層と木製コアで作られています。EVAは、軽量で柔軟な構造を提供し、優れた衝撃吸収性と長寿命の耐久性を誇ります。木製コアは優れた高さを提供し、最大28日間持続します。これらはWALKEASEラピッドグルーを使用して蹄に取り付けられ、左または右の蹄に使用できます。WALKEASEハイブリッドフォームブロックは低コストで、簡単に適用できます。特別な技術や経験は必要ありません。この取扱説明書の指示に従う必要があります。これらの指示から逸脱すると、接着剤の失敗につながる可能性があります。

WALKEASE ハイブリッドフォームブロックは、中程度の跛行を引き起こす蹄の損傷を修復する目的で使用されます。薄い蹄底など、約 2〜4 週間のリフティングが必要な症状の回復に最適です。

WALKEASE ラピッドグルーは、ほとんどの他の蹄ブロック用接着剤とは異なります。接着剤を活性化するためには、蹄や大気中の自然な湿気が必要です。蹄を人工的に乾燥させてはいけません (温風やアルコールの使用は禁止)。非常に寒く乾燥した天候では、接着剤が活性化するまでに長い時間が必要になる場合があります。(接着面に貼付前、数回息を吹きかけると効果があります。)

接着剤の保存性を維持するため、冷蔵庫で保管してください。使用前に冷蔵庫から取り出します。接着剤は室温または体温

程度で使用するのが最適です。

装着手順:

傷ついた蹄の治療を完了させた後、健康な蹄をブロック装着負傷した蹄趾の処置を完了した後、健康な蹄趾にブロックを装着するための準備を行います。蹄の下処理にどのような工具を使用した場合でも、仕上げには必ず WALKEASE 用のやすりを使用してください。このやすりによって、WALKEASE ハイブリッドフォームブロックが接着するために必要な、清潔で平らな正しい表面が作られます。やすりは常に清潔に保つ必要があります。

WALKEASE ハイブリッドフォームブロックは、接着面が汚れないよう注意して丁寧に扱ってください。蹄に当ててサイズと形状を確認します。蹄壁全体を支えることができ、なおかつ大きくはみ出さない適切なサイズを選択してください。

WALKEASE ラピッドグルーを扱う際は、必ず手袋を着用してください。2 ML の使い切りチューブの内容物すべてを使用してブロックに接着剤を塗布します。約10秒間しっかり圧力をかけていると、ブロックが「グッ」とつかむ感覚があります (寒冷時はさらに時間がかかる場合があります)。「つかみ」が感じられたら速やかに蹄を下ろし、接着が完了するよう動物にブロックへ全体重をかけさせます。接着剤が完全に硬化する前に体重がかけられないと、ブロックは正しく接着されません。

接着剤は動物の体重がかかると非常に速く硬化します。余分

な接着剤は押し出され、ブロックは蹄面に沿って変形し密着します。これにより接触面積が増え、より強固な接着が得られます。寒冷時には接着完了までの時間が少し長くなることがあるため、拘束から解放する前に動物をブロックの上で少し長めに立たせてください。

WALKEASE ハイブリッドフォームブロックは、通常取り外す必要はありません。2〜4 週間で自然に摩耗します。

追加のブロックや接着剤は、お近くのSHOOFディーラーを通じて注文可能です。

図1 必要に応じて、蹄病の処置を行ってください。

図2 健康蹄に、やすりを使って、接着の準備をしてください。


図3 WALKEASE ハイブリッドフォームブロックに、チューブ1本分の接着剤を全量塗布してください。

図4 健康蹄の蹄壁に沿ってあてられたブロックを強く押し付けてください。

図5 迅速に肢をおろして、ブロックに牛の体重を乗せてください。

注意:裏ページにあるチャートより、ブロックを押し付ける時間を確認して下さい。

注:フロントページ上のチャートから、確認してくださいにブロックを押して時間を作ります。

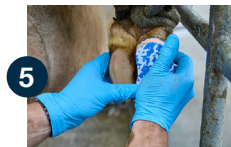

Walkease hibridiniai putų blokai pagaminti iš specialiai suformuoto etileno-vinilo acetato (EVA) putų išorės ir medinio branduolio. EVA siūlo lengvą, lanksčią konstrukciją su puikiu smūgio sugėrimu ir ilgalaikiu atsparumu. Medinis branduolys suteikia puikų pakėlimą ir trunka iki 28 dienų. Jie tvirtinami prie kanopos naudojant Walkease Rapid Glue klįjus ir gali būti naudojami tiek kairėje, tiek dešinėje kanopoje. Walkease hibridiniai putų blokai yra nebrangūs ir lengvai naudojami. Specialių įgūdžių ar patirties nereikia. Šioje instrukcijų knygelėje pateiktos nuorodos turi būti griežtai laikomasi. Bet kokie nukrypimai nuo šių instrukcijų greičiausiai sukels klijų nesėkmę.

Walkease hibridiniai putų blokėliai skirti pataisyti kanopos traumas, dėl kurių atsiranda vidutinio laipsnio šlubavimas. Jie idealiai tinka tokiai būklei kaip plonos pado dalys bei kitoms problemoms, kurioms reikalingas maždaug 2–4 savaičių pakėlimas.

Greiti klįjai Walkease skiriasi nuo daugumos kitų klijų, naudojamų kanopų blokams. Natūrali drėgmė kanopoje ir aplinkoje yra būtina, kad klįjai aktyvuotųsi. **Kanopa neturėtų būti dirbtinai džiovinama (karštu oru ar alkoholiu).** Labai šaltu oru, kai oras labai sausas, gali prireikti daugiau laiko, kad klįjai aktyvuotųsi. (Keletą kartų prieš naudojant, kvėpavimas ant klįjuojamos paviršiaus padės).

Norint išlaikyti tinkamumo laiką, klįjus reikia laikyti šaldytuve.

Prieš naudojimą išimkite juos iš šaldytuvo. Klįjai geriausiai veikia esant maždaug kambario arba kūno temperatūrai.

Uždėjimas:

Sužeistos kanopos gydymas turi būti baigtas, tada sveika kanopa paruošiama blokui pritvirtinti. Walkease raspa reikia naudoti, kad baigtumėte kanopos paviršių, nepriklausomai nuo kitų įrankių, kurie galėjo būti naudojami kanopai paruošti. Ši raspa suteikia teisingą, švarų ir lygų paviršių, kad Hibridiniai putplasčio blokėliai „Walkease“ gerai priliptų. Raspa turi būti laikoma švari.

Rūpinkitės Hibridiniai putplasčio blokėliai „Walkease“, užtikrinant, kad klįjavimo paviršius būtų švarus. Patikrinkite bloką dėl dydžio ir formos ant kanopos. Pasirinkite tinkamą dydį, kuris palaikytų visą kanopos sienelę, tačiau nesukurtų didelės persidengimo.

Visada dėvėkite pirštines, kai dirbate su Greitaisiais klįjais Walkease. Naudodami visą 2 mL vienkartinio naudojimo tūbelės turinį, užtepkite klįjų, kad pritvirtintumėte bloką. Po maždaug 10 sekundžių nuolatinio spaudimo pajusite, kad blokas „suiama“ (galbūt ilgiau šaltame ore). Tuoj po to, kai blokas „suiama“, nuleiskite kanopą, kad gyvūnas galėtų uždėti visą svorį ant bloko ir užbaigti jungimą. Hibridiniai

putplasčio blokėliai „Walkease“ nesitvirtins tinkamai, jei svoris nebus pritaikytas, kol klįjai nebus visiškai sukietėję.

Klįjai labai greitai stingsta po gyvūno svorio. Pertekliniai klįjai išspaudžiami, o blokai prisitaiko prie kanopos paviršiaus. Tai pagerina paviršiaus kontaktą, suteikdama stipresnį ryšį. Šaltame ore sujungimo laikas gali šiek tiek padidėti, todėl leiskite gyvūnui šiek tiek ilgiau pabūti ant bloko, prieš išleidami jį iš narvo.

Hibridiniai putplasčio blokėliai „Walkease“ paprastai nereikia pašalinti. Jie natūraliai suyra po 2–4 savaites.

Papildomi blokai ir klįjai gali būti užsakomi per jūsų Shoof pardavėją.

Fig. 1. Gydykite sužeistą kanopą pagal poreikį.

Fig. 2. Naudokite rasą, kad paruoštumėte greitą kanopą klįjavimui.

Fig. 3. Užtepkite visą klijų tūbelės turinį ant Hibridiniai putplasčio blokėliai „Walkease“

Fig. 4. Svirti bloką tvirtai ant sveikos kanopos, uždengiant kanopos sienelę.

Fig. 5. Tuoj pat nuleiskite kojelę, kad gyvūnas galėtų uždėti svorį ant bloko.

Pastaba: laiko sukibimas rasite lentelę pirmame puslapyje



A Walkease Hybrid Habfoam Blokkok speciálisan kifejlesztett etilén-vinil-acetát (EVA) hab külső réteggel és fa maggal készülnek. Az EVA könnyű, rugalmas szerkezetet kínál, kiváló ütécscillapítással és hosszú élettartammal. A fa mag kiemelkedő magasságot biztosít, és akár 28 napig is tart. A blokkok a Walkease Rapid Glue ragasztóval rögzíthetők a patához, és használhatók a bal vagy a jobb pata esetében is. A Walkease Hybrid Habfoam Blokkok alacsony költségűek és könnyen alkalmazhatók. Különleges készség és tapasztalat nem szükséges. A használati utasításban szereplő irányelveket be kell tartani. Az utasításoktól való eltérés valószínűleg a ragasztó meghibásodásához vezet.

A Walkease hibrid habblokkokat mérsékelt sántaságot okozó patasérülések kezelésére szánják. Ideálisak olyan problémák gyógyulásához, mint például a vékony talpfal, illetve más, körülbelül 2-4 hét megemlést igénylő állapotok.

A Walkease Rapid Glue különbözik a legtöbb más pata-blokk ragasztótól. A ragasztó aktiválásához szükség van a pata és a levegő természetes nedvességtartalmára. **A patát nem szabad mesterségesen szárítani (forró levegővel vagy alkohollal).** Nagyon hideg időben, amikor a levegő nagyon száraz, több időre lehet szükség a ragasztó aktiválásához. (Hasznos lehet, ha a ragasztott felületre néhányszor közelről lélegzik a pata felhelyezése előtt.)

A szavatosság megőrzése érdekében a ragasztót hűtőben kell tárolni. Használat előtt vegye ki a hűtőből. A ragasztót legjobban környezeti vagy testhőmérséklet körül érdemes használni.

A felhelyezés menete:

A sérült pata kezelését először teljesen el kell végezni, majd az egészséges patát kell előkészíteni a blokk felhelyezéséhez. A Walkease reszelőt (rasp) használjuk a patafelszín végső simításához, függetlenül attól, hogy milyen más eszközöket használtak a pata előkészítésére. Ez a reszelő biztosítja a megfelelő, tiszta és sík felületet, amelyhez a Walkease hibrid habblokk megfelelően tapad. A reszelőt tisztán kell tartani.

A Walkease hibrid habblokkot óvatosan kezeljük, ügyelve arra, hogy a ragasztandó felület tiszta maradjon. Ellenőrizzük a blokk méretét és alakját a patán. Válasszuk ki a megfelelő méretet, amely az egész patafalat támogatja, de nem hoz létre nagy átfedést.

Mindig viseljük kesztyűt a Walkease Rapid Glue használata közben. Vigyük fel a ragasztót a 2 mL-es, egyszer használatos tubus teljes tartalmával a blokk rögzítéséhez. Körülbelül 10 másodpercnyi állandó nyomás után érezni fogjuk, hogy a blokk „megfog” (hideg időben ez tovább is tarthat). Amint a blokk megfogott, azonnal engedjük le a patát, hogy az állat teljes súlyával ráhelyezze a blokkra a lábát, ezzel befejezve a kötést. A Walkease hibrid habblokk nem fog megfelelően tapadni, ha a ragasztó teljes kikeményedése előtt nem helyezzük rá súlyt.



A ragasztó az állat súlya alatt nagyon gyorsan megköt. A felesleges ragasztó kifolyik, és a blokk a patafelszínhez igazodik. Ez növeli a felületi érintkezést, erősebb kötést biztosítva. Hideg időben a kötési idő kissé megnővekedhet, ezért hagyjuk az állatot egy kicsit tovább állni a blokk tetején, mielőtt elengednénk a tartókeretből.

A Walkease hibrid habblokkokat általában nem kell eltávolítani. Természetes úton 2-4 hét alatt kopnak le.

További blokkok és ragasztó a Shoof-kereskedőjén keresztül rendelhetők.

1. ábra: Szükség szerint kezelje a sérült talpat.
2. ábra: A reszelővel készítse elő a talpat a ragasztásra.
3. ábra: Vigyen fel egy teljes tubus ragasztót a Walkease hibrid habtömbre.
4. ábra: Határozott mozdulattal nyomja rá a tömböt az egészséges talpra, úgy, hogy túlnyúljon a pata falán.
5. ábra: Azonnal engedje le a lábat, hogy az állat ránehezedhessen a tömbre.

Nota bene : nézd meg „ a ragasztó kötési ideje „ táblázatban az első oldalon

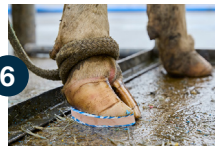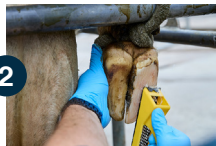

Walkease Hybride Schuimblokken zijn gemaakt met een speciaal samengestelde buitenlaag van ethyleen-vinylacetaat (EVA) en een houten kern. EVA biedt een lichtgewicht, flexibele constructie met uitstekende schokabsorptie en langdurige duurzaamheid. De houten kern zorgt voor een optimale verhoging en gaat tot 28 dagen mee. Ze worden aan de hoof bevestigd met behulp van een cyanoacrylaatlijm. Walkease Hybride Schuimblokken zijn goedkoop en eenvoudig aan te brengen; speciale vaardigheden of ervaring zijn niet vereist. De instructies in dit gebruikboekje moeten strikt worden gevolgd, aangezien iedere afwijking waarschijnlijk zal leiden tot falen van de lijm.

Walkease Hybride Schuimblokken zijn bedoeld voor het herstellen van hoefletsels die matige kreupelheid veroorzaken. Ze zijn ideaal voor het herstel van aandoeningen zoals dunne zolen en andere omstandigheden die ongeveer 2-4 weken verhoging vereisen.

Walkease Snellijm is anders dan de meeste andere hoefblokljmen. De natuurlijke vochtigheid in de hoof en in de atmosfeer is nodig om de lijm te activeren. **De hoof mag niet kunstmatig worden gedroogd (warmte of alcohol).** In zeer koud weer, wanneer de lucht erg droog is, kan het langer duren om de lijm te activeren. (Een paar keer dicht bij het gelijmde oppervlak ademen voor de applicatie op de hoof zal helpen.)

Om de houdbaarheid te behouden, moet de lijm in de koelkast

worden bewaard. Haal de lijm uit de koelkast voordat u deze gebruikt. De lijm werkt het beste bij ongeveer kamertemperatuur of lichaamstemperatuur.

Aanmeet procedure:

De behandeling van de gewonde klauw moet worden voltooid, waarna de gezonde klauw wordt voorbereid voor het bevestigen van het blok. De Walkease rasp moet worden gebruikt om het hoefoppervlak af te werken, ongeacht welke andere gereedschappen mogelijk zijn gebruikt om de hoof voor te bereiden. Deze rasp zorgt voor een schone, vlakke en juiste oppervlakte, zodat de Walkease Hybride Schuimblok goed hecht. De rasp moet schoon worden gehouden.

Behandel de Walkease Hybride Schuimblok zorgvuldig en zorg ervoor dat het kleefoppervlak schoon blijft. Test het blok op grootte en vorm op de hoof. Kies de juiste maat die de gehele hoefwand ondersteunt, zonder grote overlappen te creëren.

Draag altijd handschoenen bij het hanteren van Walkease Snellijm. Breng de lijm aan door de volledige inhoud van de 2 mL eenmalige tube te gebruiken om het blok vast te zetten. Na ongeveer 10 seconden constante druk zult u voelen dat het blok 'pakt' (mogelijk langer in koud weer). Direct na het 'pakken',

laat de hoof zakken zodat het dier volledig gewicht op het blok kan zetten om de verbinding te voltooiën. De Walkease Hybride Schuimblok zal niet goed hechten als het gewicht niet wordt aangebracht voordat de lijm volledig is uitgehard.

De lijm zet zeer snel onder het gewicht van het dier. Het overtollige lijm wordt eruit gedrukt en het blok past zich aan het hoefoppervlak aan. Dit verbetert het contactoppervlak, waardoor de verbinding sterker wordt. Bij koud weer kan de bindingstijd iets langer zijn, dus geef het dier wat langer de tijd om op het blok te staan voordat je het uit de knijper haalt.

Walkease Hybride Schuimblokken hoeven over het algemeen niet te worden verwijderd. Ze slijten natuurlijk na 2 - 4 weken.

Extra blokken en lijm kunnen via uw Shoof dealer worden besteld.


Fig 1. Behandel de gewonde klauw zoals vereist.

Fig 2. Gebruik de rasp om de aangrenzende klauw voor te bereiden op het lijmen.

Fig 3. Breng de volledige inhoud van de lijmtube aan op het Walkease Hybride Schuimblok.

Fig 4. Druk het blok stevig op de gezonde klauw, zodat het de hoefwand overlapt.

Fig 5. Laat het been onmiddellijk zakken, zodat het vee gewicht op het blok kan zetten.

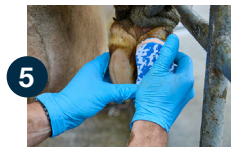

Walkease Hybrid Foam Blocks er laget med et spesialformulert etylen-vinylacetat (EVA) skumlag og en trefiberkjerne. EVA gir en lett, fleksibel konstruksjon med overlegen støtdemping og langvarig holdbarhet. Trefiberkjernen gir overlegen heving og varer i opptil 28 dager. De festes til hoven ved hjelp av Walkease Rapid Glue, og kan brukes på enten venstre eller høyre klo. Walkease Hybrid Foam Blocks er rimelige og enkle å påføre. Spesielle ferdigheter og erfaring er ikke nødvendige. Instruksjonene i denne bruksanvisningen må følges. Eventuelle avvik fra disse instruksjonene vil sannsynligvis føre til at limet svikter.

Walkease Hybrid Foam Blocks er beregnet for bruk ved reparasjon av hovskader som gir moderat halthet. De er ideelle for tilheling av problemer som tynne såler og andre tilstander som krever omtrent 2–4 ukers avlastning.

Walkease Raskt Lim skiller seg fra de fleste andre hovblokk-lim. Naturlig fuktighet i hoven og i luften er nødvendig for å aktivere limet. **Hoven må ikke tørkes kunstig (varmluft eller alkohol).** I svært kaldt vær, når luften er veldig tørr, kan det kreves mer tid for å aktivere limet. (Å puste lett på den limte overflaten noen ganger før påføring på hoven kan hjelpe.)

For å opprettholde holdbarheten bør limet oppbevares i kjøleskap. Ta det ut av kjøleskapet før bruk. Limet fungerer best ved omtrent rom- eller kroppstemperatur.

Prosedyren ved festing:

Behandlingen av den skadede kloan må være fullført, deretter forberedes den friske kloan for montering av blokken. Walkease rasp skal brukes for å ferdigstille hovoverflaten, uansett hvilke andre verktøy som kan ha blitt brukt til å forberede hoven. Denne raspen gir en korrekt, ren og flat overflate for at Walkease Hybrid Skumblokk skal feste seg. Raspen må holdes ren.

Hånder Walkease Hybrid Skumblokk forsiktig og sørg for at limflaten holdes ren. Test blokken for størrelse og form på hoven. Velg riktig størrelse som støtter hele hovveggen, uten å skape store overlapp.

Alltid bruk hansker når du håndterer Walkease Raskt Lim. Påfør limet ved å bruke hele innholdet i 2 mL engangsrøret for å feste blokken. Etter omtrent 10 sekunder med jevnt trykk vil du føle at blokken «griper». (Muligens lengre tid i kaldt vær). Umiddelbart etter at blokken har «gripet», senk hoven slik at dyret kan legge full vekt på blokken for å fullføre bindingen. Walkease Hybrid Skumblokk vil ikke feste ordentlig hvis ikke vekt påføres før limet er helt herdet.

Limet stivner svært raskt under dyrets vekt. Overflødig lim presses ut, og blokken tilpasser seg hovoverflaten. Dette

øker kontaktflaten og gir en sterkere binding. I kaldt vær kan bindingstiden bli litt lengre, så la dyret stå litt lenger på blokken før det slippes ut av smedkassen.

Walkease Hybrid Skumblokker trenger vanligvis ikke å fjernes. De slites naturlig bort etter 2–4 uker.

Ekstra blokker og lim kan bestilles gjennom din Shoof-forhandler.

Fig. 1. Gi den skadde hoven nødvendig behandling.


Fig. 2. Bruk raspen for å klargjøre hoven for liming.

Fig. 3. Påfør en hel tube med lim på Walkease Hybrid skumblokken.

Fig. 4. Press klossen bestemt på den sunne hoven, slik at den overlapper hovveggen.

Fig. 5. Senk foten slik at dyret får satt vekten på klossen

NB: Se tabellen for 'greptid' på baksiden.

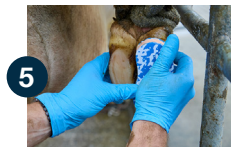

Hybrydowe bloki piankowe Walkease są wykonane z specjalnie opracowanego materiału zewnętrznego z octanu etylenu-winyłu (EVA) oraz drewnianego rdzenia. EVA zapewnia lekką, elastyczną konstrukcję, z doskonałą absorpcją wstrząsów i długotrwałą wytrzymałością. Drewniany rdzeń zapewnia optymalne podniesienie i utrzymuje się do 28 dni. Bloki są przymocowane do kopyta za pomocą kleju cyjanoakrylowego. Hybrydowe bloki piankowe Walkease są niskokosztowe i łatwe w zastosowaniu; nie są wymagane specjalne umiejętności ani doświadczenie. Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w tym podręczniku, ponieważ każde odstępstwo może spowodować niepowodzenie kleju.

Hybrydowe bloki piankowe Walkease przeznaczone są do naprawy urazów kopyta powodujących umiarkowaną kulawiznę. Są idealne do rekonwalescencji w przypadku problemów takich jak cienkie podeszwy oraz innych schorzeń wymagających około 2-4 tygodni podniesienia.

Szybki klej Walkease różni się od większości innych klejów do bloków kopytowych. Do aktywacji kleju wymagana jest naturalna wilgoć w kopycie oraz w atmosferze. **Kopyta nie wolno sztucznie osuszać (ciepłym powietrzem lub alkoholem).** W bardzo zimną i suchą pogodę może być potrzebne więcej czasu na aktywację kleju. (Kilka oddechów skierowanych w stronę posmarowanej powierzchni przed nałożeniem na kopyto może pomóc w aktywacji kleju.)

Aby zachować trwałość, klej należy przechowywać w lodówce. Przed użyciem wyjmij go z lodówki. Klej najlepiej stosować w temperaturze pokojowej lub ciała.

Sposób mocowania:

Leczenie uszkodzonej kopyta musi zostać zakończone, a następnie zdrowa kopyta przygotowane do zamocowania bloku. Do wykończenia powierzchni kopyta należy użyć raspa Walkease, niezależnie od innych narzędzi, które mogły być użyte do przygotowania kopyta. Ten rasp zapewnia prawidłową, czystą i płaską powierzchnię, do której przylega Hybrydowe bloki piankowe Walkease. Rasp należy utrzymywać w czystości.

Hybrydowe bloki piankowe Walkease należy obsługiwać ostrożnie, dbając o to, aby powierzchnia do klejenia pozostała czysta. Przetestuj blok pod kątem rozmiaru i kształtu na kopycie. Wybierz odpowiedni rozmiar, który będzie podparł całą ścianę kopyta, ale nie będzie tworzył dużych nałożonych fragmentów.

Zawsze noś rękawice podczas obsługi Walkease Rapid Glue. Nałóż klej, używając całej zawartości jednorazowej tubki 2 mL, aby zabezpieczyć blok. Po około 10 sekundach stałego nacisku poczujesz, że blok „chwyci”. (W zimnej pogodzie czas ten może być dłuższy). Natychmiast po „chwytaniu” opuść kopyto, aby zwierzę mogło położyć pełną wagę na bloku i

zakończyć połączenie. Hybrydowe bloki piankowe Walkease nie przyczepi się prawidłowo, jeśli waga nie zostanie zastosowana przed całkowitym utwardzeniem kleju.

Klej utwardza się bardzo szybko pod ciężarem zwierzęcia. Nadmiar kleju zostaje wyciśnięty, a blok dopasowuje się do powierzchni kopyta. Poprawia to kontakt powierzchniowy, zapewniając mocniejsze połączenie. W zimnej pogodzie czas utwardzania może się nieco wydłużyć, dlatego pozwól zwierzęciu stać na bloku nieco dłużej, zanim zostanie zwolnione z kagańca.

Hybrydowe bloki piankowe Walkease zazwyczaj nie wymagają usuwania. Naturalnie zużywają się po 2-4 tygodniach.

Dodatkowe bloki i klej można zamówić u swojego dealera Shoof.

Rys. 1 Leczenie uszkodzonej racicy zgodnie z potrzebą.


Rys. 2 Zastosuj tamnik, aby przygotować racicę do mocowania bloczka.

Rys. 3 Nałóż całą zawartość tubki kleju na Hybrydowe bloki piankowe Walkease

Rys. 4 Dociśnij blok mocno do zdrowej racicy, zachodząc na ścianę racicy.

Rys. 5 Niezwłocznie opuść kopyto, aby zwierzę mogło na nim stanąć całym ciężarem ciała.

Uwaga : Patrz . Stół “ czas wiązania “ na stronie głównej.

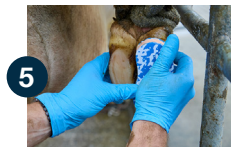

Os Blocos de Espuma Híbridos Walkease são fabricados com uma camada externa de espuma de etileno-vinil-acetato (EVA) especialmente formulada e um núcleo de madeira. O EVA oferece uma construção leve e flexível, com excelente absorção de choques e durabilidade de longa duração. O núcleo de madeira proporciona elevação superior e dura até 28 dias. Eles são fixados ao casco utilizando a Cola Rápida Walkease e podem ser usados tanto na garra esquerda quanto na direita. Os Blocos de Espuma Híbridos Walkease são de baixo custo e fáceis de aplicar. Não são necessárias habilidades ou experiência especiais. As instruções deste manual devem ser seguidas corretamente. Qualquer desvio dessas instruções provavelmente resultará em falha do adesivo.

Os blocos de espuma híbridos Walkease são destinados à reparação de lesões no casco que resultem em claudicação moderada. Eles são ideais para a recuperação de problemas como cascos finos e outras condições que necessitam de aproximadamente 2 a 4 semanas de elevação.

O Cola Rápida Walkease é diferente da maioria dos outros adesivos para blocos de casco. A umidade natural no casco e na atmosfera é necessária para ativar a cola. **O casco não deve ser seco artificialmente (ar quente ou álcool).** Em climas muito frios, quando o ar está muito seco, pode ser necessário mais tempo para ativar a cola. (Respirar próximo à superfície colada algumas vezes antes da aplicação no casco ajuda.)

Para manter a vida útil, a cola deve ser armazenada na geladeira.

Retire da geladeira antes de usar. A cola é melhor utilizada em temperatura ambiente ou corporal.

Procedimento de ajustamento:

O tratamento da garra lesionada deve ser concluído, e então a garra saudável deve ser preparada para a aplicação do bloco. A lima Walkease deve ser utilizada para finalizar a superfície do casco, independentemente de quais outras ferramentas tenham sido usadas para prepará-lo. Esta lima fornece a superfície correta, limpa e plana, para que o blocos de espuma híbrida Walkease adira adequadamente. A lima deve ser mantida limpa.

Manuseie o blocos de espuma híbrida Walkease com cuidado, garantindo que a face de colagem permaneça limpa. Teste o bloco no casco quanto ao tamanho e formato. Escolha o tamanho correto que suporte toda a parede do casco, mas sem criar sobreposição excessiva.

Use sempre luvas ao manusear a Cola Rápida Walkease.

Aplique a cola usando todo o conteúdo do tubo de 2 mL de uso único para fixar o bloco. Após cerca de 10 segundos de pressão constante, você sentirá o bloco "agarrar". (Pode levar mais tempo em clima frio). Logo após o "agarrar", abaixe o casco para que o animal possa colocar todo o peso sobre o bloco, completando a fixação. O blocos de espuma híbrida Walkease não se prenderá corretamente se o peso não for aplicado antes que a cola esteja totalmente curada.

A cola endurece muito rapidamente sob o peso do animal. O excesso de cola é espremido e o bloco se ajusta à superfície do casco. Isso aumenta a área de contato, proporcionando uma ligação mais forte. Em clima frio, o tempo de fixação pode aumentar um pouco, então deixe o animal ficar mais tempo sobre o bloco antes de liberá-lo do brete.

Os blocos de espuma híbrida Walkease geralmente não precisam ser removidos. Eles se desgastam naturalmente após 2 a 4 semanas.

Blocos e cola extras podem ser encomendados através do seu revendedor Shoof.

Fig 1. Trate o casco lesado conforme seja necessário.



Fig 2. Use o raspador para preparar o casco para a colagem.

Fig 3. Aplique todo o conteúdo do tubo de cola no blocos de espuma híbrida Walkease.

Fig 4. Pressione o bloco firmemente sobre a garra saudável, sobrepondo-o à parede do casco.

Fig 5. Assim que possível, deixe a vaca aplicar seu peso no bloco.

NB: Ver tabela ' Tempo de Fixação ' na primeira página

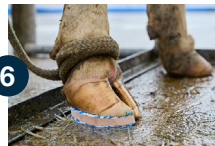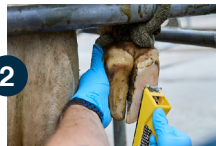

Гибридные пенопластовые блоки Walkease изготовлены с использованием специально разработанного наружного слоя из этилен-винилацетата (EVA) и деревянного ядра. EVA обеспечивает легкую, гибкую конструкцию с превосходной амортизацией и долговечной прочностью. Деревянное ядро обеспечивает надежное приподнимание и сохраняет свои свойства до 28 дней. Блоки крепятся к копыту с помощью цианоакрилатного клея. Гибридные пенопластовые блоки Walkease недороги и легко применяются; специальные навыки и опыт не требуются. Необходимо строго соблюдать инструкции, приведенные в этом руководстве, так как любое отклонение может привести к неудаче клеевого соединения.

Гибридные пенопластовые блоки Walkease предназначены для восстановления копыт после травм, вызывающих умеренную хромоту. Они идеально подходят для лечения таких проблем, как тонкие подошвы, а также других состояний, требующих приподнимания на срок около 2–4 недель.

Быстрый клей Walkease отличается от большинства других клеев для блоков копыт. Для активации клея требуется естественная влажность копыта и воздуха. **Копыто не должно быть искусственно высушено (горячим воздухом или спиртом).** В очень холодную погоду, когда воздух очень сухой, может потребоваться больше времени для активации клея. (Несколько раз подышав на поверхность с клеем перед нанесением на копыто, можно повысить влажность и улучшить адгезию.)

Для сохранения срока годности клей следует хранить в холодильнике. Перед использованием достаньте его из холодильника. Клей лучше всего использовать при комнатной или телесной температуре.

Процедура установки:

Лечение поврежденного копыта должно быть завершено, после чего готовится здоровое копыто для установки блока. Для обработки поверхности копыта следует использовать рашпиль Walkease, независимо от того, какими другими инструментами готовили копыто. Этот рашпиль обеспечивает правильную чистую и ровную поверхность, к которой будет приклеиваться Гибридные пеноблоки Walkease. Рашпиль необходимо содержать в чистоте.

Обращайтесь с Гибридные пеноблоки Walkease осторожно, следя за тем, чтобы клеевая поверхность оставалась чистой. Проверьте размер и форму блока на копыте. Выберите правильный размер, который будет поддерживать всю стенку копыта, но без значительного перекрытия.

Всегда надевайте перчатки при работе с быстрым клеем Walkease. Нанесите клей, используя весь 2 мл тюбик одноразового использования, чтобы зафиксировать блок. После примерно 10 секунд равномерного давления вы почувствуете, как блок «схватывается». (В холодную погоду процесс может занять больше времени.) Сразу после «схватывания» опустите копыто, чтобы животное могло полностью перенести вес на блок для завершения сцепления. Гибридные пеноблоки Walkease не прикрепятся правильно, если на него не будет приложен вес до полного отверждения клея.

Клей Walkease Rapid очень быстро схватывается под весом животного. Избыточный клей выдавливается, и Гибридные пеноблоки Walkease принимают форму поверхности копыта.

Это увеличивает площадь контакта, обеспечивая более прочное сцепление. В холодную погоду время сцепления может немного увеличиться, поэтому дайте животному немного дольше постоять на блоке, прежде чем отпускать его из фиксатора.

Гибридные пеноблоки Walkease обычно не требуют удаления. Они естественным образом стираются через 2–4 недели.

Дополнительные блоки и клей можно заказать через вашего дилера ShooF.

Рисунок 1. Обработайте поврежденную копытину по необходимости.

Рисунок 2. Используйте рашпиль для подготовки поверхности копыта к приклеиванию.

Рисунок 3. Нанесите весь тюбик клея на Гибридные пеноблоки Walkease.

Рисунок 4. Плотно прижмите колодку к здоровому копыту, перекрывая копытную стенку.

Рисунок 5. Немедленно опустите ногу скота, чтобы перенести его вес на блок.

Примечание : Время схватывания указывается на первой странице



Walkease Hybrid-vahtolohkot on valmistettu erityisesti muotoillusta etyleeni-vinyyliasetaatti (EVA) -vahtokerroksesta ja puuytimestä. EVA tarjoaa kevyen, joustavan rakenteen, joka tarjoaa erinomaisen iskunkestävyyden ja pitkäkestoisen kestävyyskyvyn. Puuydin tarjoaa erinomaisen korkeusnousun ja kestää jopa 28 päivää. Ne kiinnitetään kavioon käyttämällä Walkease Rapid Glue -liimaa ja niitä voidaan käyttää sekä vasemmassa että oikeassa kynnessä. Walkease Hybrid-vahtolohkot ovat edullisia ja helppoja käyttää. Erityisiä taitoja tai kokemusta ei tarvita. Tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita on noudatettava tarkasti. Poikkeaminen näistä ohjeista voi todennäköisesti johtaa liiman epäonnistumiseen.

Walkease Hybrid-vahtolohkot on tarkoitettu kavion vammojen hoitoon, kun ne aiheuttavat kohtalaista ontumista. Ne soveltuvat erityisen hyvin ohuiden anturoiden ja muiden noin 2–4 viikon korotusta vaativien vaivojen kuntoutukseen.

Walkease Rapid Glue -liima eroaa useimmista muista kaviolohkoliimoista. Liiman aktivoimiseksi tarvitaan luonnollista kosteutta kaviosta ja ilmasta. **Kavioita ei saa kuivata keinotekoisesti (kuuma ilma tai alkoholi).** Erittäin kylmässä ja kuivassa säässä liiman aktivoitumiseen voi kulua enemmän aikaa. (Hengittäminen lähelle liimattavaa pintaa muuttaman kerran ennen kaviolle asettamista auttaa.)

Säilyvyysajan ylläpitämiseksi liima tulisi säilyttää jääkaapissa. Ota se jääkaapista ennen käyttöä. Liimaa on parasta käyttää noin huoneenlämpöisenä tai kehonlämpöisenä.

Kiinnittäminen:

Vamman saanut koura on hoidettava loppuun, minkä jälkeen terve koura valmistellaan lohkon kiinnitystä varten. Walkease-kaapimia tulisi käyttää kavion pinnan viimeistelyyn riippumatta siitä, mitä muita työkaluja on käytetty kavion valmistelussa. Tämä kaapiminen takaa oikean, puhtaan ja tasaisen pinnan, johon Walkease-hybridivahtomuovilohko tarttuu. Kaapiminen on oltava puhdas.

Käsittele Walkease-hybridivahtomuovilohko huolellisesti varmistaen, että liimattava pinta pysyy puhtaana. Testaa lohkon koko ja muoto kaviolla. Valitse oikea koko, joka tukee koko kavion seinämää, mutta ei aiheuta suurta päällekkäisyyttä.

Käytä aina suojakäsineitä Walkease Rapid Glue -liiman käsittelyssä. Levitä liima käyttämällä koko 2 mL:n kertakäyttöputken sisältö lohkon kiinnittämiseksi. Noin 10 sekunnin tasaisen paineen jälkeen tunnet lohkon "tarttuvan". (Kylmemmässä säässä voi kestää hieman kauemmin.) Heti tartuttamisen jälkeen laske katio, jotta eläin voi laittaa koko painonsa lohkolle liiman täydellistä kiinnittymistä varten. Walkease-hybridivahtomuovilohko ei kiinnity kunnolla, jos painoa ei kohdisteta ennen liiman täydellistä kovettumista.

Liima kovettuu erittäin nopeasti eläimen painon alla. Liian suuri liima puristuu ulos ja lohko mukautuu kavion pintaan. Tämä

parantaa kontaktipintaa ja antaa vahvemman kiinnityksen. Kylmässä säässä liiman kovettumisaika voi hieman pidentyä, joten anna eläimen seistä loholla hieman pidempään ennen kuin vapautat sen puristimesta.

Walkease-hybridivahtomuovilohko ei yleensä tarvitse poistaa. Ne kuluvat luonnollisesti 2–4 viikon kuluessa.

Lisälohkoja ja liimaa voi tilata Shooof-jälleenmyyjältäsi.

Kuva 1. Hoida lehmän loukkaantunutta kynttä tarpeen mukaan.


Kuva 2. Käytä raskia toisen varvasosan valmisteluun liimaamista varten.

Kuva 3. Levitä koko tuubi liimaa Walkease-hybridivahtomuovilohko.

Kuva 4. Paina tuki napakasti terveeseen varvasosaan kavion ulkoseinämän yli

Kuva 5. Laske lehmän jalka heti alas, jotta se voi astua painolla tuen päälle

HUOMAUTUS . Katso ” Tarttumisaika ” pöydän etusivulla

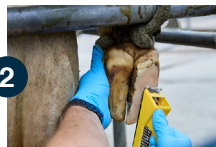

Walkease Hybrid Skumblock är tillverkade med ett specialformulerat yttre lager av etylen-vinylacetat (EVA) och en tråkärna. EVA erbjuder en lätt och flexibel konstruktion med överlägsen stötdämpning och långvarig hållbarhet. Tråkärnan ger en utmärkt höjning och varar upp till 28 dagar. Blocken fästs på hoven med hjälp av ett cyanoakrylatlim. Walkease Hybrid Skumblock är kostnadseffektiva och enkla att applicera; särskilda färdigheter eller erfarenhet krävs inte. Instruktionerna i denna bruksanvisning måste följas noggrant, eftersom avvikelser sannolikt leder till att limmet misslyckas.

Walkease Hybrid Skumblock är avsedda för att reparera hovskador som orsakar måttlig hälta. De är idealiska för återhämtning från problem såsom tunna sulor och andra tillstånd som kräver cirka 2–4 veckors höjning.

Walkease Snabblim skiljer sig från de flesta andra lim för klövblock. Den naturliga fukten i klöven och i atmosfären behövs för att aktivera limmet. **Klöven får inte torkas artificiellt (varmluft eller alkohol).** I mycket kallt väder, när luften är mycket torr, kan det ta längre tid att aktivera limmet. (Att andas nära den limmade ytan några gånger innan applicering på klöven kan hjälpa.)

För att bibehålla hållbarheten bör limmet förvaras i kylskåp. Ta ut det ur kylskåpet innan användning. Limmet används bäst vid ungefär rumstemperatur eller kroppstemperatur.

Monteringsanvisningar:

Behandlingen av den skadade klöven måste slutföras innan den friska klöven förbereds för montering av blocket. Walkease rasp ska användas för att jämna till klövens yta, oavsett vilka andra verktyg som kan ha använts för att förbereda klöven. Denna rasp ger en korrekt, ren och plan yta för att Walkease Hybrid Skumblock ska fästa ordentligt. Raspen måste hållas ren.

Hantera Walkease Hybrid Skumblock försiktigt och se till att limytan hålls ren. Testa blocket på klöven för storlek och form. Välj rätt storlek som stödjer hela klövväggen utan att skapa större överlappning.

Använd alltid handskar när du hanterar Walkease Snabblim. Applicera limmet med hela innehållet i 2 mL engångstuben för att fästa blocket. Efter cirka 10 sekunder med jämnt tryck kommer du känna att blocket "fäster". (Kan ta längre tid i kallt väder.) Sänk genast klöven efter att blocket har fast, så att djuret kan lägga full vikt på blocket och fullborda limningen. Walkease Hybrid Skumblock fäster inte ordentligt om vikt inte appliceras innan limmet har härdat helt.

Limmet härdar mycket snabbt under djurets vikt. Överskottslimmet pressas ut och blocket anpassar sig efter klövens yta. Detta förbättrar kontaktytan och ger en starkare

bindning. I kallt väder kan härdningstiden öka något, så låt djuret stå lite längre på blocket innan det släpps ur stallet.

Walkease Hybrid Skumblock behöver vanligtvis inte tas bort. De slits naturligt bort efter 2–4 veckor.

Extra skumblock och Rapid-lim kan beställas via din Shoof-återförsäljare.

Fig 1. Behandla den skadade klon efter behov.



Fig 2. Använd raspen för att förbereda den intilliggande klon för limning.

Fig 3. Applicera ett helt limrör på Walkease Hybrid Skumblocket

Fig 4. Tryck blocket ordentligt mot den friska klon och se till att det överlappar hovväggen.

Fig 5. Släpp snabbt ner benet så att kon kan lägga vikt på blocket.

NOTERA ! Läs tabellen "bota" på framsidan .

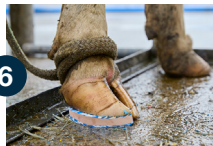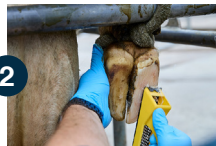

Walkease Hybrid Köpük Blokları, özel formüle edilmiş etilen-vinil asetat (EVA) köpük dış katman ve ahşap çekirdekten üretilmiştir. EVA, üstün darbe emilimi ve uzun süreli dayanıklılık sağlayan hafif ve esnek bir yapı sunar. Ahşap çekirdek, üstün bir yükselti sağlar ve 28 güne kadar dayanır. Bunlar, Walkease Rapid Glue kullanılarak kovoğa yapıştırılır ve hem sol hem de sağ pençede kullanılabilir. Walkease Hybrid Köpük Blokları düşük maliyetli ve kolayca uygulanabilir. Özel bir beceri veya deneyim gerekmez. Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulmalıdır. Bu talimatlardan herhangi bir sapma, yapıştırıcının başarısız olmasına yol açabilir.

Walkease Hibrit Köpük Blokları, orta derecede topallığa neden olan toynak/pençe yaranalanmalarını onarmak için tasarlanmıştır. İnce taban gibi sorunların veya yaklaşık 2-4 hafta süreyle yükseltme gerektiren diğer durumların iyileşmesi için idealdir.

Walkease Hızlı Yapıştırıcı, çoğu diğer tırnak blok yapıştırıcılarından farklıdır. Yapıştırıcının aktive olması için tırnak ve ortamın doğal nemi gereklidir. **Tırnak yapay olarak kurutulmamalıdır (sıcak hava veya alkol ile).** Hava çok kuru ve çok soğuk olduğunda, yapıştırıcının aktive olması için daha fazla zaman gerekebilir. (Yapıştırılan yüzeye birkaç kez yakın mesafeden nefes almak uygulamadan önce yardımcı olur.)

Raf ömrünün korumak için yapıştırıcı buzdolabında saklanmalıdır. Kullanımdan önce buzdolabından çıkarın. Yapıştırıcı, oda sıcaklığına veya vücut sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta en iyi şekilde kullanılır.

Uygulama:

Yaralı tırnak tedavisi tamamlandıktan sonra, sağlıklı tırnak blok yerleştirilmek üzere hazırlanmalıdır. Tırnak yüzeyini düzeltmek için Walkease törpüsü kullanılmalıdır; tırnak hazırlanırken başka hangi araçlar kullanılmış olursa olsun, bu törpü doğru, temiz ve düz bir yüzey sağlar ve Walkease hibrit köpük blokları yapışmasını kolaylaştırır. Törpü temiz tutulmalıdır.

Walkease hibrit köpük blokları dikkatli bir şekilde tutun ve yapıştırma yüzeyinin temiz kalmasını sağlayın. Bloğun tırnağa uygun boyut ve şekilde olup olmadığını test edin. Tüm tırnak duvarını destekleyecek, ancak büyük bir taşma yaratmayacak doğru boyutu seçin.

Walkease Hızlı Yapıştırıcı ile çalışırken her zaman eldiven giyin. Bloku sabitlemek için 2 ml'lik tek kullanımlık tüpün tamamını uygulayın. Yaklaşık 10 saniye boyunca sabit baskı uyguladıktan sonra blok "tutunma" hissi verecektir. (Soğuk havalarda bu süre biraz daha uzun olabilir.) "Tutunma" sağlandıktan hemen sonra tırnağı indirin, böylece hayvan bloka tam ağırlığını verebilir ve yapışma tamamlanır. Walkease hibrit köpük blokları, yapıştırıcı tamamen sertleşmeden önce ağırlık uygulanmazsa düzgün şekilde tutunmaz.

Yapıştırıcı, hayvanın ağırlığı altında çok hızlı bir şekilde sertleşir. Fazla yapıştırıcı sıkışır ve blok, tırnak yüzeyine uyum sağlar. Bu, temas yüzeyini artırarak daha güçlü bir bağ oluşturur. Soğuk havalarda yapışma süresi biraz uzayabilir, bu yüzden hayvanı blok üzerinde biraz daha uzun süre bekletin ve ardından sıkıştırma aparatından serbest bırakın.

Walkease hibrit köpük blokları genellikle çıkarılmaya gerek duymaz. 2-4 hafta içinde doğal olarak aşınırlar.

Ek bloklar ve yapıştırıcı, Shoof bayiniz aracılığıyla sipariş edilebilir.

Resim 1. Yaralı pençeyi gerektiği gibi tedavi ediniz.

Resim 2. Diğer pençeyi yapışmaya hazırlamak için törpü kullanınız.

Resim 3. Yapıştırıcı tüpünün tamamını Walkease hibrit köpük blokları ekleyin.

Resim 4. Toynak duvarının üzerine gelecek şekilde, sağlıklı pençenin üzerine sertçe bastırınız.

Resim 5. İneğin ayağını hemen indirin ki ağırlığını bloğa verebilsin.

NOT: Arka sayfadaki, 'Tutma Süresi' tablosuna bakınız.

