

Wooden Block

INSTRUCTION BOOKLET

Walkease Wooden Blocks provide a long-lasting solution for managing moderate lameness in cattle.

Attaching a Walkease Wooden Block to the healthy claw provides elevation for the injured claw, promoting healing by minimising weight-bearing and pressure for up to 35 days. Walkease Wooden Blocks speed up recovery and mobility, keeping your herd mobile and productive. A wooden block may shed naturally or require removal.



Available in 18 languages

ENGLISH
中文
DANSK
DEUTSCH
ESPAÑOL

FRANÇAIS
ITALIANO
日本語
LIETUVIŲ
MAGYAR

NEDERLANDS
NORSK
POLSKI
PORTUGUÊS
РУССКИЙ

SUOMI
SVENSKA
TÜRKÇE



Always use with Walkease 2-Part Glue and Walkease Glue Dispenser Gun for best results.

Shoof Lameness Scale

A cow's lameness is assessed on a scale of 0 – 3, with 0 representing a normal walk and 3 indicating a severely lame cow.

Assessment is based on indicators such as walking speed, rhythm, stride length, weight bearing, back alignment, and head movement.

Score	Action	Walkease Foam Blocks	Walkease Hybrid Blocks	Walkease Wooden Blocks	Hoofers Cow Clogs
0 No Lameness	Walks evenly, no action required				
1 Mild Lameness	Minor action required, monitor	✓			
2 Moderate Lameness	Action required, examine within 24 hours		✓	✓	
3 Severe Lameness	Urgent action required, treat immediately				✓



Need help? We're here for you.

New Zealand: Shoof International Ltd. 224 Laurent Road North, Cambridge 3493, New Zealand. Ph 0800 800 801

Australia: Shoof International Pty Ltd. 1 International Square, Tullamarine VIC 3043, Australia. Ph 1800 121 801

Chile: Shoof International Chile Ltda. Loteo Las 7 Colinas, Fundo el Castillo, Lote N° 15, Barrio Industrial Osorno, Chile. Ph 800 600 000

www.shoofint.com/walkease

Shoof® and Walkease® are registered trademarks of Shoof International Ltd.

Walkease®: Trusted hoof care solutions

Proudly designed and developed in New Zealand by Shoof.

Walkease Wooden Blocks are part of the Walkease hoof care system offering reliable, longer-term claw elevation for moderate lameness, when durability and extended support are required.

Walkease Wooden Blocks feature a grid pattern designed for use with Walkease 2-Part Glue, our patented polyurethane adhesive. This grid design helps to reduce shear forces when the cow twists or turns, allowing the adhesive to spread evenly and form a strong, interlocked bond with the claw.

Fitting Walkease Wooden Blocks

Correct preparation and application are essential to ensure maximum bond strength and block retention.

Treat the affected claw

Trim and treat the lame claw. Proper hoof preparation is essential.

Prepare the healthy claw

Thoroughly clean the healthy (weight-bearing) claw. The healthy claw surface should be clean and dry to ensure effective bonding. Inadequate drying may lead to poor adhesion.

Walkease 2-Part Glue application

Insert the Walkease 2-Part Glue cartridge into the Walkease Glue Dispenser Gun and attach a new mixing tip. The mixing tip ensures that the two parts of the polyurethane adhesive mixture are dispensed at the correct ratio.

Apply the block

Using the Walkease Glue Dispenser Gun, begin applying glue to the wooden block. Ensure both components flow evenly.



IMPORTANT: Apply and position the block immediately after mixing, as the adhesive begins curing approximately 12 seconds after mixing.

Apply approximately 20 mL of the mixed adhesive, in a continuous zig-zag pattern across the block (Fig. 3), to ensure even coverage when pressed onto the hoof, particularly around the edges, see (Fig. 4) below.

Press the block firmly onto the healthy claw, ensuring it is correctly aligned and the glue spreads to cover the entire block surface. Maintain firm pressure for approximately 30 seconds.

Full bond strength develops as the adhesive cures and becomes fully load-bearing in approximately 90 seconds, depending on environmental temperatures.

Once set, gently lower the foot allowing the animal to place weight on the block.

Walkease Wooden Blocks are designed to wear down naturally and typically detach as the hoof grows, but may require removal if they do not naturally wear off. Blocks should not be left on a claw for longer than 35 days.

We recommend using Walkease 2-Part Glue and the Walkease Glue Dispenser Gun with wooden blocks for best performance.

Note: In cold conditions, bond time may vary. Store cartridges at room temperature before use to improve flow and curing.

- Fig 1. Treat the injured claw as required.
- Fig 2. Apply approximately 20 mL of the mixed adhesive, in a continuous zig-zag pattern across the block to ensure even coverage.
- Fig 3. Ensure full coverage and that the block is properly aligned with the claw axis before placement.
- Fig 4. Press the block firmly onto the healthy claw. Maintain firm pressure for approximately 30 seconds.
- Fig 5. The Walkease Wooden Block becomes fully load-bearing in approximately 90 seconds. Once set, gently lower the leg allowing the animal to place weight on the block.

Additional Wooden Blocks, Mixing Tips and 2-Part Glue can be ordered through your Shoof dealer.



Walkease 木质垫块是 Walkease 蹄部护理系统的一部分，适用于中度跛行情况，在需要耐用性和较长支撑时间时，可提供可靠、较长期的蹄部抬高效果。

Walkease 木质垫块采用网格结构设计，专为配合 Walkease 双组分胶使用，该胶为我们专利的聚氨酯粘合剂。此网格设计有助于在奶牛扭动或转身时减少剪切力，使粘合剂能够均匀分布，并与蹄部形成牢固的互锁粘结。

安装 Walkease 木质垫块

正确的准备和操作对于确保最大粘结强度和垫块的稳固性至关重要。

处理患病蹄

修整并处理跛行蹄。适当的蹄部准备非常关键。

准备健康蹄

彻底清洁健康（承重）蹄。健康蹄表面应保持清洁干燥，以确保良好的粘结效果。干燥不充分可能导致粘结不牢。

Walkease 双组分胶的使用

将 Walkease 双组分胶装入 Walkease 胶枪，并安装新的混合喷嘴。混合喷嘴可确保两组分聚氨酯粘合剂以正确比例混合并挤出。

安装木块

使用 Walkease 胶枪 开始在木块上涂抹胶水。确保两种成分均匀流出。



重要提示： 混合后应立即涂抹并放置木块，因为胶水在混合后约 12 秒 开始固化。

将大约 20 毫升 混合胶水以连续的之字形图案涂抹在木块上，以确保在压到蹄子上时均匀覆盖，尤其是木块的边缘（见下图 4）。

将木块牢固地压在健康蹄子上，确保位置正确，并使胶水覆盖整个木块表面。保持约 30 秒 的稳定压力。

随着胶水固化并完全承重，最大粘合强度将在约 90 秒 内形成，具体时间取决于环境温度。

固化后，轻轻放下蹄子，让动物将体重放在木块上。

Walkease 木块 设计为自然磨损，并通常会随着蹄子生长而脱落，但如果未能自然脱落，可能需要人工移除。木块不应在同一蹄子上停留超过 35 天。

我们建议使用 Walkease 双组分胶水以及 Walkease Glue Dispenser Gun 配合木质蹄块，以获得最佳效果。

注意：在低温条件下，粘接时间可能会有所变化。使用前请将胶筒在室温下存放，以改善流动性和固化效果。

图 1 根据需要对受伤的蹄进行处理。

图 2 将约 20 mL 混合后的胶水以连续的“之”字形涂抹在蹄块上，以确保均匀覆盖。

图 3 在放置前，确保完全覆盖，并使蹄块与蹄轴正确对齐。

图 4 将蹄块牢固按压在健康蹄上，保持约 30 秒的稳定压力。

图 5 Walkease 木质蹄块约在 90 秒后即可完全承重。固定后，轻轻放下牛腿，使其将重量放在蹄块上。

更多木质蹄块、混合嘴和双组分胶水可通过您的 Shoof 经销商订购。

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Walkease Træklodser er en del af Walkease hovplejesystem og tilbyder pålidelig, langvarig løftning af kloven ved moderat halte, når holdbarhed og længerevarende støtte er påkrævet.

Walkease Træklodser har et gittermønster designet til brug med Walkease 2-Komponent Lim, vores patenterede polyurethan-adhæsiv. Dette gitterdesign hjælper med at reducere forskydningskræfter, når koen drejer eller vender, hvilket gør det muligt for limen at sprede sig jævnt og danne et stærkt, sammenlåst bånd med kloven.

Montering af Walkease Træklodser

Korrekt forberedelse og påføring er afgørende for at sikre maksimal bindingsstyrke og fastholdelse af klodsen.

Behandl den påvirkede klo

Trim og behandl den halte klo. Korrekt forberedelse af kloven er afgørende.

Forbered den sunde klo

Rens grundigt den sunde (vægtbærende) klo. Den sunde klavs overflade skal være ren og tør for at sikre effektiv binding. Utilstrækkelig tørring kan føre til dårlig vedhæftning.

Påføring af Walkease 2-Komponent Lim

Indsæt Walkease 2-Komponent Lim-kassetten i Walkease Limdispenserpistolen, og fastgør en ny blandespids. Blandespidsen sikrer, at de to dele af polyurethan-adhæsivblandingen dispenseres i korrekt forhold.



Fig.



Fig.



Fig.



Fig.



Fig.

Påføring af blok

Brug Walkease Glue Dispenser Gun til at begynde at påføre lim på træblokken. Sørg for, at begge komponenter flyder jævnt.



VIGTIGT: Påfør og placer blokken straks efter blanding, da klæbemidlet begynder at hærde cirka 12 sekunder efter blanding.

Påfør ca. 20 ml af den blandede klæbemasse i et kontinuerligt zigzag-mønster over hele blokken for at sikre ensartet dækning, når den presses mod kloven, især omkring kanterne (se fig. 4 nedenfor).

Tryk blokken fast mod den sunde klo, og sørg for, at den er korrekt justeret, og at limen fordeler sig, så hele blokoverfladen dækkes. Oprethold et fast tryk i ca. 30 sekunder.

Fuld bindingsstyrke udvikles, efterhånden som limen hærdner, og bliver fuldt belastningsbærende efter ca. 90 sekunder, afhængigt af omgivelsestemperaturen.

Når den er hærdet, sænk forsigtigt foden, så dyret kan lægge vægt på blokken.

Walkease træblokke er designet til at blive slidt naturligt og løsner sig typisk, efterhånden som kloven vokser, men kan

kræve fjernelse, hvis de ikke slides af naturligt. Blokke bør ikke sidde på en klo i mere end 35 dage.

Vi anbefaler brug af Walkease 2-komponent lim og Walkease Glue Dispenser Gun sammen med træklodser for bedst mulig ydeevne.

Bemærk: I kolde forhold kan hærdetiden variere. Opbevar patroner ved stuetemperatur før brug for at forbedre flow og hærdning.

Fig. 1. Behandl den beskadigede klo efter behov.

Fig. 2. Påfør ca. 20 ml af den blandede klæbemasse i et kontinuerligt zigzag-mønster over hele klodsen for at sikre jævn dækning.

Fig. 3. Sørg for fuld dækning, og at klodsen er korrekt justeret i forhold til kloens akse før påføring.

Fig. 4. Pres klodsen fast mod den sunde klo. Oprethold et fast tryk i ca. 30 sekunder.

Fig. 5. Walkease træklods bliver fuldt belastningsbærende efter ca. 90 sekunder. Når den er hærdet, sænk forsigtigt benet, så kvæg kan lægge vægt på klodsen.

Yderligere træklodser, blandingspids og 2-komponent lim kan bestilles gennem din Shoof-forhandler.

Walkease Holzklötze sind Teil des Walkease Klauenpflegesystems und bieten bei mittelgradiger Lahmheit eine zuverlässige, längerfristige Klauenentlastung, wenn Haltbarkeit und verlängerte Unterstützung erforderlich sind.

Walkease Holzklötze verfügen über ein Gittermuster, das für die Verwendung mit dem Walkease 2-Komponenten-Kleber entwickelt wurde, unserem patentierten Polyurethan-Klebstoff. Dieses Gitterdesign hilft, Scherkräfte zu reduzieren, wenn sich die Kuh dreht oder wendet, sodass sich der Klebstoff gleichmäßig verteilt und eine starke, formschlüssige Verbindung mit der Klaue bilden kann.

Anbringen von Walkease Holzklötzen

Die richtige Vorbereitung und Anwendung sind entscheidend, um maximale Klebekraft und sicheren Halt der Klötze zu gewährleisten.

Behandlung der betroffenen Klaue

Die lahme Klaue fachgerecht schneiden und behandeln. Eine korrekte Klauenvorbereitung ist unerlässlich.

Vorbereitung der gesunden Klaue

Die gesunde (tragende) Klaue gründlich reinigen. Die Oberfläche der gesunden Klaue muss sauber und trocken sein, um eine wirksame Verklebung zu gewährleisten. Unzureichendes Trocknen kann zu schlechter Haftung führen.

Anwendung des Walkease 2-Komponenten-Klebers

Setzen Sie die Kartusche des Walkease 2-Komponenten-Klebers in die Walkease Dosierpistole ein und befestigen Sie eine neue Mischdüse. Die Mischdüse stellt sicher, dass die beiden Komponenten

des Polyurethan-Klebstoffs im richtigen Verhältnis gemischt und aufgetragen werden.

Block aufbringen

Verwenden Sie die Walkease Klebepistole, um Klebstoff auf den Holzblock aufzutragen. Achten Sie darauf, dass beide Komponenten gleichmäßig fließen.



WICHTIG: Tragen Sie den Block unmittelbar nach dem Mischen auf und positionieren Sie ihn, da der Klebstoff etwa 12 Sekunden nach dem Mischen mit dem Aushärten beginnt.

Tragen Sie etwa 20 ml des gemischten Klebstoffs in einem durchgehenden Zickzackmuster über den Block auf, um eine gleichmäßige Abdeckung beim Aufpressen auf die Klaue zu gewährleisten, insbesondere an den Rändern (siehe Abb. 4 unten).

Drücken Sie den Block fest auf die gesunde Klaue, achten Sie darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist und der Klebstoff die gesamte Blockoberfläche bedeckt. Halten Sie den Block etwa 30 Sekunden lang fest gedrückt.

Die volle Klebkraft entwickelt sich, während der Klebstoff aushärtet, und der Block wird nach etwa 90 Sekunden vollständig belastbar, abhängig von der Umgebungstemperatur.

Nachdem der Klebstoff ausgehärtet ist, senken Sie den Fuß vorsichtig ab, sodass das Tier Gewicht auf den Block legen kann.

Walkease Holzblöcke sind so konzipiert, dass sie sich natürlich

abnutzen und normalerweise mit dem Wachstum der Klaue abfallen. Falls sie nicht von selbst abfallen, müssen sie möglicherweise entfernt werden. Blöcke sollten nicht länger als 35 Tage an einer Klaue verbleiben.

Wir empfehlen die Verwendung von Walkease 2-Part Glue und der Walkease Glue Dispenser Gun in Kombination mit Holzklötzen für optimale Leistung.

Hinweis: Bei kalten Bedingungen kann sich die Aushärtungszeit verändern. Lagern Sie die Kartuschen vor der Verwendung bei Raumtemperatur, um den Fluss und die Aushärtung zu verbessern.

Fig 1. Behandeln Sie die verletzte Klaue entsprechend den Anforderungen.

Fig 2. Tragen Sie etwa 20 ml des gemischten Klebstoffs in einem kontinuierlichen Zickzackmuster auf den Block auf, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

Fig 3. Stellen Sie vor dem Anbringen sicher, dass der Block vollständig bedeckt ist und korrekt zur Klauenachse ausgerichtet ist.

Fig 4. Drücken Sie den Block fest auf die gesunde Klaue. Halten Sie etwa 30 Sekunden lang festen Druck aufrecht.

Fig 5. Der Walkease Holzblock ist nach etwa 90 Sekunden voll belastbar. Sobald er fixiert ist, senken Sie das Bein vorsichtig ab, damit das Rind Gewicht auf den Block bringen kann

Zusätzliche Holzblöcke, Mischspitzen und 2-KomponentenKleber können über Ihren ShooF-Händler bestellt werden.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Los Bloques de Madera Walkease forman parte del sistema de cuidado de pezuñas Walkease, ofreciendo una elevación confiable y de larga duración de la pezuña en casos de cojeras moderadas, cuando se requiere durabilidad y soporte prolongado.

Los Bloques de Madera Walkease cuentan con un patrón de rejilla diseñado para usarse con el Pegamento de 2 Componentes Walkease, nuestro adhesivo de poliuretano patentado. Este diseño de rejilla ayuda a reducir las fuerzas de cizallamiento cuando la vaca gira o se mueve, permitiendo que el adhesivo se distribuya uniformemente y forme un vínculo fuerte e interbloqueado con la pezuña.

Colocación de los Bloques de Madera Walkease

La preparación y aplicación correctas son esenciales para asegurar la máxima resistencia del adhesivo y la retención del bloque.

Tratar la pezuña afectada

Recortar y tratar la pezuña coja. Una preparación adecuada de la pezuña es fundamental.

Preparar la pezuña sana

Limpiar a fondo la pezuña sana (que soporta peso). La superficie de la pezuña sana debe estar limpia y seca para asegurar una adhesión efectiva. Un secado inadecuado puede provocar una mala adhesión.

Aplicación del Pegamento de 2 Componentes Walkease

Inserte el cartucho de Pegamento de 2 Componentes Walkease en la Pistola Dispensadora Walkease y coloque una nueva punta mezcladora. La punta mezcladora asegura que las dos partes de la mezcla adhesiva de poliuretano se dispensen en la proporción correcta.

Aplicación del bloque

Utilizando la pistola dispensadora de adhesivo Walkease Glue Dispenser Gun, comience a aplicar el pegamento sobre el bloque de madera. Asegúrese de que ambos componentes fluyan de manera uniforme.



IMPORTANTE: Aplique y coloque el bloque inmediatamente después de mezclar, ya que el adhesivo comienza a curarse aproximadamente 12 segundos después de la mezcla.

Aplique aproximadamente 20 mL del adhesivo mezclado en un patrón continuo en zigzag sobre todo el bloque para garantizar una cobertura uniforme cuando se presione contra la pezuña, especialmente en los bordes (ver Fig. 4 a continuación).

Presione el bloque firmemente contra la pezuña sana, asegurándose de que esté correctamente alineado y de que el pegamento se extienda para cubrir toda la superficie del bloque. Mantenga una presión firme durante aproximadamente 30 segundos.

La resistencia total de la unión se desarrolla a medida que el adhesivo cura y alcanza su capacidad total de carga en aproximadamente 90 segundos, dependiendo de la temperatura ambiente.

Una vez fijado, baje suavemente la pata para permitir que el animal apoye el peso sobre el bloque.

Los bloques de madera Walkease están diseñados para desgastarse de forma natural y normalmente se desprenden a medida que crece la pezuña, pero pueden requerir su retirada si no se desgastan por sí solos. Los bloques no deben permanecer en la pezuña durante

más de 35 días.

Recomendamos el uso del adhesivo de 2 componentes Walkease y de la pistola aplicadora Walkease Glue Dispenser Gun con bloques de madera para un mejor rendimiento.

Nota: En condiciones de frío, el tiempo de adhesión puede variar. Almacene los cartuchos a temperatura ambiente antes de su uso para mejorar el flujo y el curado.

Fig 1. Tratar la pezuña lesionada según sea necesario.

Fig 2. Aplicar aproximadamente 20 ml del adhesivo mezclado en un patrón continuo en zigzag sobre el bloque para garantizar una cobertura uniforme.

Fig 3. Asegurar una cobertura completa y que el bloque esté correctamente alineado con el eje de la pezuña antes de su colocación.

Fig 4. Presionar firmemente el bloque contra la pezuña sana. Mantener una presión firme durante aproximadamente 30 segundos.

Fig 5. El bloque de madera Walkease alcanza su capacidad total de carga en aproximadamente 90 segundos. Una vez fijado, bajar suavemente la pata para que el ganado apoye el peso sobre el bloque.

Bloques de madera adicionales, puntas de mezcla y adhesivo de 2 componentes pueden solicitarse a través de su distribuidor Shooof.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Les blocs en bois Walkease font partie du système de soins des sabots Walkease et offrent une élévation fiable et durable de la pince en cas de boiterie modérée, lorsque la durabilité et un soutien prolongé sont nécessaires.

Les blocs en bois Walkease présentent un motif en grille conçu pour être utilisé avec la colle Walkease à 2 composants, notre adhésif polyuréthane breveté. Cette conception en grille permet de réduire les forces de cisaillement lorsque la vache pivote ou tourne, permettant à l'adhésif de se répartir uniformément et de former une liaison solide et imbriquée avec la pince.

Pose des blocs en bois Walkease

Une préparation et une application correctes sont essentielles pour garantir une résistance maximale de l'adhérence et un bon maintien des blocs.

Traiter la pince affectée

Parer et traiter la pince boiteuse. Une préparation adéquate du sabot est essentielle.

Préparer la pince saine

Nettoyer soigneusement la pince saine (porteuse). La surface de la pince saine doit être propre et sèche pour assurer une adhésion efficace. Un séchage insuffisant peut entraîner une mauvaise adhérence.

Application de la colle Walkease à 2 composants

Insérer la cartouche de colle Walkease à 2 composants dans le pistolet applicateur Walkease et fixer un nouvel embout mélangeur. L'embout mélangeur garantit que les deux composants de l'adhésif polyuréthane sont délivrés dans le bon rapport.

Appliquer le bloc

À l'aide du pistolet distributeur de colle Walkease, commencez à appliquer la colle sur le bloc en bois. Assurez-vous que les deux composants s'écoulent de manière homogène.



IMPORTANT: Appliquez et positionnez le bloc immédiatement après le mélange, car l'adhésif commence à durcir environ 12 secondes après le mélange.

Appliquez environ 20 mL d'adhésif mélangé, en un motif continu en zigzag sur le bloc afin d'assurer une couverture uniforme lors de la pression sur le sabot, en particulier autour des bords (voir Fig. 4 ci-dessous).

Appuyez fermement le bloc sur l'onglon sain, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné et que la colle se répartisse de façon à couvrir toute la surface du bloc. Maintenez une pression ferme pendant environ 30 secondes.

La résistance maximale de liaison se développe à mesure que l'adhésif durcit et devient entièrement porteur en environ 90 secondes, selon la température ambiante.

Une fois la prise effectuée, abaissez doucement le pied pour permettre à l'animal de poser son poids sur le bloc.

Les blocs en bois Walkease sont conçus pour s'user naturellement et se détachent généralement à mesure que le sabot pousse, mais ils peuvent nécessiter un retrait s'ils ne se détachent pas naturellement.

Les blocs ne doivent pas rester sur un onglon plus de 35 jours.

Nous recommandons l'utilisation de la Walkease 2-Part Glue et du pistolet applicateur Walkease Glue Dispenser Gun avec des blocs en bois pour des performances optimales.

Remarque : par temps froid, le temps de liaison peut varier. Conservez les cartouches à température ambiante avant utilisation afin d'améliorer l'écoulement et le durcissement.

Fig 1. Traiter la griffe blessée selon les besoins.

Fig 2. Appliquer environ 20 mL de l'adhésif mélangé en un motif continu en zigzag sur le bloc afin d'assurer une couverture uniforme.

Fig 3. S'assurer d'une couverture complète et que le bloc est correctement aligné avec l'axe de la griffe avant la pose.

Fig 4. Presser fermement le bloc sur la griffe saine. Maintenir une pression ferme pendant environ 30 secondes.

Fig 5. Le bloc en bois Walkease devient entièrement porteur en environ 90 secondes. Une fois fixé, abaisser doucement la patte afin que le bovin puisse prendre appui sur le bloc.

Des blocs en bois supplémentaires, des embouts de mélange et de la colle bi-composant peuvent être commandés auprès de votre revendeur Shooof.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



I blocchi di legno Walkease fanno parte del sistema di cura degli zoccoli Walkease, offrendo un sollevamento affidabile e a lungo termine dello zoccolo in caso di zoppia moderata, quando sono richiesti durata e supporto prolungato.

I blocchi di legno Walkease presentano un motivo a griglia progettato per essere utilizzato con la colla Walkease a 2 componenti, il nostro adesivo in poliuretano brevettato. Questo design a griglia aiuta a ridurre le forze di taglio quando la mucca ruota o si muove, permettendo all'adesivo di distribuirsi in modo uniforme e creare un legame forte e interbloccato con lo zoccolo.

Installazione dei blocchi di legno Walkease

Una corretta preparazione e applicazione sono essenziali per garantire la massima resistenza dell'adesivo e la tenuta del blocco.

Trattare lo zoccolo colpito

Rifilare e trattare lo zoccolo zoppo. Una preparazione adeguata dello zoccolo è fondamentale.

Preparare lo zoccolo sano

Pulire accuratamente lo zoccolo sano (portante). La superficie dello zoccolo sano deve essere pulita e asciutta per garantire un'adesione efficace. Un'asciugatura insufficiente può portare a una scarsa adesione.

Applicazione della colla Walkease a 2 componenti

Inserire la cartuccia della colla Walkease a 2 componenti nella pistola erogatrice Walkease e fissare una nuova punta miscelatrice. La punta miscelatrice assicura che le due parti della miscela adesiva in poliuretano vengano erogate nel corretto rapporto.

Applicazione del blocco

Utilizzando la pistola erogatrice di colla Walkease Glue Dispenser Gun, iniziare ad applicare la colla sul blocco di legno. Assicurarsi che entrambi i componenti fluiscano in modo uniforme.



IMPORTANTE: Applicare e posizionare il blocco immediatamente dopo la miscelazione, poiché l'adesivo inizia a indurirsi circa 12 secondi dopo la miscelazione.

Applicare circa 20 mL di adesivo miscelato con un movimento continuo a zig-zag su tutto il blocco, per garantire una copertura uniforme quando viene premuto sullo zoccolo, in particolare ai bordi (vedere Fig. 4 sotto).

Premere saldamente il blocco sullo zoccolo sano, assicurandosi che sia correttamente allineato e che la colla si distribuisca su tutta la superficie del blocco. Mantenere una pressione costante per circa 30 secondi.

La piena resistenza del legame si sviluppa durante la polimerizzazione dell'adesivo, che diventa completamente portante in circa 90 secondi, a seconda della temperatura ambiente.

Una volta fissato, abbassare delicatamente il piede, permettendo all'animale di appoggiare il peso sul blocco.

I blocchi in legno Walkease sono progettati per consumarsi naturalmente e generalmente si staccano con la crescita dello zoccolo, ma possono richiedere la rimozione se non si consumano spontaneamente. I blocchi non devono rimanere applicati a uno zoccolo per più di 35 giorni.

Fig. 1. Trattare la zampa danneggiata come richiesto.

Fig. 2. Usare la raspa per preparare la zampa adiacente per l'incollaggio.

Fig. 3. Applicare l'intero tubo di colla al Blocco di Schiuma Ibrida Walkease.

Fig. 4. Premere saldamente il blocco sulla zampa sana, sovrapponendo la parete dello zoccolo.

Fig. 5. Abbassare prontamente la zampa affinché il bestiame possa mettere il peso sul blocco.

NB: vedere la tabella di 'stringere Time' in prima pagina



WALKEASE 木製ブロックは、WALKEASE 蹄ケアシステムの一部であり、中程度の跛行に対して、耐久性と長時間のサポートが求められる場合に、信頼性の高い長期的な蹄の挙上を提供します。

WALKEASE 木製ブロックは、当社の特許取得済みポリウレタン接着剤である WALKEASE 2液接着剤と併用するために設計されたグリッドパターンを採用しています。このグリッド設計により、牛がひねったり方向転換した際のせん断力を軽減し、接着剤が均一に広がって蹄と強固にかみ合う結合を形成します。

WALKEASE 木製ブロックの装着

最大の接着強度とブロックの保持力を確保するためには、適切な準備と施工が不可欠です。

患部の蹄の処置

跛行している蹄をトリミングし、処置を行います。適切な蹄の準備が重要です。

健康な蹄の準備

健康な（体重を支える）蹄を十分に洗浄します。健康な蹄の表面は、効果的な接着のために清潔で乾燥している必要があります。乾燥が不十分な場合、接着不良の原因となる可能性があります。

WALKEASE 2液接着剤の使用法

WALKEASE 2液接着剤のカートリッジを WALKEASE 専用ディスペンサーガンに装着し、新しいミキシングノズルを取り付けます。ミキシングノズルは、ポリウレタン接着剤の2つの成分が正しい比率で混合・吐出されることを保証します。

ブロックの装着

WALKEASE GLUE DISPENSER GUN を使用して、木製ブロックに接着剤の塗布を開始します。2つの成分が均等に流れることを確認してください。



重要: 接着剤は混合後約12秒で硬化が始まるため、混合後すぐにブロックを装着し、正しい位置に配置してください。

混合した接着剤を約20ML、連続したジグザグパターンでブロック全体に塗布します。特に縁の部分まで均一に広がるようにし、蹄に押し当てた際に全面に行き渡るようにします（図4参照）。

ブロックを健全な蹄にしっかりと押し付け、正しく位置合わせされていること、および接着剤がブロック表面全体に広がっていることを確認します。約30秒間、しっかりと圧力をかけ続けてください。

接着剤が硬化するにつれて完全な接着強度が発現し、環境温度にもよりますが、約90秒で完全に荷重に耐えられる状態になります。

固定後は、ゆっくりと脚を下ろし、動物がブロックに体重をかけられるようにします。

WALKEASEの木製ブロックは自然に摩耗するよう設計されており、通常は蹄の成長に伴って外れますが、自然に外れない場合は取り外しが必要になることがあります。ブロックは35日以上、蹄に装着したままにしないでください。

最高の性能を得るために、WALKEASE 2液タイプ接着剤および WALKEASE GLUE DISPENSER GUN を木製ブロックと併用することを推奨します。

注意: 低温条件では接着時間が変化することがあります。使用前にカートリッジを室温で保管し、流動性および硬化性能を向上させてください。

図1 必要に応じて損傷した爪を処置する。

図2 約20MLの混合接着剤を、ブロック全体に連続したジグザグパターンで塗布し、均一な被覆を確保する。

図3 装着前に、完全に覆われていること、およびブロックが爪の軸に正しく整列していることを確認する。

図4 健康な爪にブロックをしっかりと押し付け、約30秒間強い圧力を維持する。

図5 WALKEASE木製ブロックは約90秒で完全に荷重を支えられる状態になります。固定後は、牛がブロックに体重をかけられるよう、脚をゆっくり下ろす。

追加の木製ブロック、ミキシングチップ、2液接着剤は、お近くの SHOOF販売店から注文できます。

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



„Walkease“ medinės kaladėlės yra „Walkease“ kanopų priežiūros sistemos dalis, suteikianti patikimą, ilgalaikį kanopų pakėlimą esant vidutinio sunkumo šlubumui, kai reikalingas ilgaaamžiškumas ir ilgalaikė parama.

„Walkease“ medinės kaladėlės turi tinkelio raštą, skirtą naudoti kartu su „Walkease“ dviejų dalių klijais – mūsų patentuotu poliuretano klijų mišiniu. Šis tinkelio dizainas padeda sumažinti šlyties jėgas, kai karvė suka ar pasuka kanopą, leidžiant klijams tolygiai pasiskirstyti ir suformuoti stiprų, tarpusavyje įsikibusį ryšį su kanopa.

„Walkease“ medinių kaladėlių tvirtinimas

Teisinga paruošimo ir naudojimo technika yra būtina, norint užtikrinti maksimalų klijų sukibimą ir kaladėlių laikymąsi.

Apdorokite pažeistą kanopą

Apkirpkite ir apdorokite šlubą kanopą. Tinkamas kanopos paruošimas yra būtinas.

Paruoškite sveiką kanopą

Išsamiai nuvalykite sveiką (svorį laikantį) kanopą. Sveikos kanopos paviršius turi būti švarus ir sausas, kad būtų užtikrintas efektyvus sukibimas. Nepakankamas išdžiovinimas gali lemti prastą sukibimą.

„Walkease“ dviejų dalių klijų naudojimas

Įdėkite „Walkease“ dviejų dalių klijų kasetę į „Walkease“ klijų dozatorių ir pritvirtinkite naują maišymo antgalį. Maišymo antgalis užtikrina, kad dvi poliuretano klijų mišinio dalys būtų išspaudžiamos tinkamu santykiu.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Bloko uždėjimas

Naudodami Walkease Glue Dispenser Gun, pradėkite klijuoti klijus ant medinio bloko. Įsitinkinkite, kad abu komponentai teka tolygiai.



SVARBU: Užtepkite ir tinkamai pozicionuokite bloką iškart po sumaišymo, nes klijai pradeda kietėti maždaug po 12 sekundžių nuo sumaišymo.

Užtepkite maždaug 20 ml sumaišytų klijų nenutrūkstamu zigzago raštu per visą bloką, kad užtikrintumėte tolygų padengimą prispaudžiant prie kanopos, ypač kraštuose (žr. 4 pav. žemiau).

Tvirtai prispauskite bloką prie sveikos kanopos, užtikrindami, kad jis būtų tinkamai sulgyjuotas ir klijai pasiskirstytų per visą bloko paviršių. Išlaikykite stiprų spaudimą apie 30 sekundžių.

Pilnas sukibimo stiprumas susiformuoja klijams kietėjant ir tampa visiškai apkrovą atlaikantis maždaug po 90 sekundžių, priklausomai nuo aplinkos temperatūros.

Sustingus klijams, švelniai nuleiskite koją, kad gyvūnas galėtų perkelti svorį ant bloko.

„Walkease“ mediniai blokai sukurti natūraliai nusidėvėti ir paprastai atsisiskiria kanopai augant, tačiau gali prireikti juos pašalinti, jei jie nenusidėvi natūraliai. Blokų negalima palikti ant kanopos ilgiau nei 35 dienas.

Rekomenduojame naudoti Walkease 2 komponentų klijus ir Walkease Glue Dispenser Gun kartu su mediniais blokais, kad būtų pasiektas

geriausias veikimas.

Pastaba: esant šaltoms sąlygoms, sukibimo laikas gali skirtis. Prieš naudojimą laikykite kasetes kambario temperatūroje, kad pagerėtų tekėjimas ir kietėjimas.

Fig. 1. Pažeistą nagą gydykite pagal poreikį.

Fig. 2. Užtepkite maždaug 20 ml sumaišytų klijų nuolatiniu zigzago raštu per visą bloką, kad būtų užtikrintas tolygus padengimas.

Fig. 3. Prieš uždėdami įsitinkinkite, kad padengimas yra pilnas ir blokas tinkamai sulgyjuotas su nago ašimi.

Fig. 4. Tvirtai prispauskite bloką prie sveiko nago. Išlaikykite stiprų spaudimą apie 30 sekundžių.

Fig. 5. Walkease medinis blokas tampa visiškai apkrovą atlaikantis maždaug po 90 sekundžių. Sustingus, švelniai nuleiskite koją, kad galvijas galėtų perkelti svorį ant bloko.

Papildomus medinius blokus, maišymo antgalius ir 2 komponentų klijus galima užsisakyti per jūsų Shoof atstovą.

A Walkease fa blokkok a Walkease pataápolási rendszer részét képezik, és megbízható, hosszabb távú pataemelést biztosítanak közepes fokú sántaság esetén, amikor tartósságra és hosszán tartó alátámasztásra van szükség.

A Walkease fa blokkok rácsmintázattal rendelkeznek, amelyeket a Walkease kétkomponensű ragasztóval való használatra terveztek; ez a mi szabadalmaztatott poliuretán ragasztónk. Ez a rácsos kialakítás segít csökkenteni a nyíróerőket, amikor a tehen elfordul vagy megcsavarodik, lehetővé téve, hogy a ragasztó egyenletesen eloszoljon, és erős, egymásba kapcsolódó kötést hozzon létre a patával.

Walkease fa blokkok felhelyezése

A megfelelő előkészítés és alkalmazás elengedhetetlen a maximális kötési szilárdság és a blokkok stabil rögzítése érdekében.

Az érintett pata kezelése

Asánta patát meg kell vágni és kezelni kell. A megfelelő pataelőkészítés alapvető fontosságú.

Az egészséges pata előkészítése

Az egészséges (teherhordó) patát alaposan meg kell tisztítani. Az egészséges pata felületének tisztának és száraznak kell lennie a hatékony ragasztás biztosítása érdekében. A nem megfelelő szárítás gyenge tapadáshoz vezethet.

A Walkease kétkomponensű ragasztó alkalmazása

Helyezze be a Walkease kétkomponensű ragasztó patronját a Walkease adagolópisztolyba, és csatlakoztasson egy új keverőcsőrt.

A keverőcsőrt biztosítja, hogy a poliuretán ragasztó két komponense a megfelelő arányban kerüljön adagolásra.

Blokk felhelyezése

A Walkease ragasztóadagoló pisztoly használatával kezdje meg a ragasztó felvitelét a fa blokkra. Győződjön meg arról, hogy mindkét komponens egyenletesen áramlik.



FONTOS: A blokkot közvetlenül a keverés után helyezze fel és pozicionálja, mivel a ragasztó a keverést követően körülbelül 12 másodpercen belül elkezd megkötni.

Vigyen fel körülbelül 20 ml kevert ragasztót folyamatos cikkcakk mintában a blokk teljes felületére, hogy a patára nyomva egyenletes fedést biztosítson, különösen a széleken (lásd a 4. ábrát).

Nyomja a blokkot szilárdan az egészséges csülökre, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen igazítva, és a ragasztó szétterüljön a teljes felületen. Tartsa fenn az erős nyomást körülbelül 30 másodpercig.

A teljes kötési szilárdság a ragasztó kikeményedése során alakul ki, és a környezeti hőmérséklettől függően körülbelül 90 másodperc után válik teljesen terhelhetővé.

A megkötés után óvatosan engedje le a lábat, lehetővé téve az állat számára, hogy súlyt helyezzen a blokkra.

A Walkease fa blokkok úgy vannak tervezve, hogy természetesen elkopjanak, és általában leválnak a pata növekedésével, de szükség lehet eltávolításukra, ha nem kopnak le maguktól. A blokkokat legfeljebb


35 napig szabad a csülkön hagyni.

A legjobb teljesítmény érdekében a Walkease 2-komponensű ragasztó és a Walkease Glue Dispenser Gun használatát javasoljuk fa blokkokkal együtt.

Megjegyzés: hideg körülmények között a kötési idő változhat. Használat előtt a patronokat szobahőmérsékleten tárolja a jobb folyás és kötés érdekében.

1. ábra: A sérült körmöt a szükséges módon kezelje.
2. ábra: Körülbelül 20 ml kevert ragasztót vigyen fel folyamatos, cikkcakk mintázatban a blokkon, hogy egyenletes fedést biztosítson.
3. ábra: Felhelyezés előtt gondoskodjon a teljes fedettségről és arról, hogy a blokk megfelelően illeszkedjen a köröm tengelyéhez.
4. ábra: A blokkot határozottan nyomja a egészséges körömré. Tartson fenn erős nyomást körülbelül 30 másodpercig.
5. ábra: A Walkease fa blokk körülbelül 90 másodperc után teljesen terhelhetővé válik. Rögzítés után óvatosan engedje le a lábat, hogy a szarvasmarha rá tudjon állni a blokkra.

Nota bene : nézd meg „ a ragasztó kötési ideje „ táblázatban az első oldalon

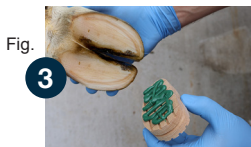

Walkease houten blokken maken deel uit van het Walkease klauwverzorgingssysteem en bieden betrouwbare, langdurige verhoging van de klauw bij matige kreupelheid, wanneer duurzaamheid en langdurige ondersteuning vereist zijn.

Walkease houten blokken hebben een rasterpatroon dat is ontworpen voor gebruik met Walkease 2-componentenlijm, onze gepatenteerde polyurethaanlijm. Dit rasterontwerp helpt schuifkrachten te verminderen wanneer de koe draait of zich omkeert, waardoor de lijm zich gelijkmatig kan verspreiden en een sterke, in elkaar grijpende verbinding met de klauw kan vormen.

Plaatsen van Walkease houten blokken

Een correcte voorbereiding en toepassing zijn essentieel om maximale hechtingssterkte en goede bevestiging van de blokken te garanderen.

Behandeling van de aangedane klauw

De kreupele klauw bekappen en behandelen. Een goede klauwvoorbereiding is essentieel.

Voorbereiden van de gezonde klauw

De gezonde (dragende) klauw grondig reinigen. Het oppervlak van de gezonde klauw moet schoon en droog zijn om een effectieve hechting te garanderen. Onvoldoende drogen kan leiden tot slechte hechting.

Toepassing van Walkease 2-componentenlijm

Plaats de Walkease 2-componentenlijmcartridge in het Walkease lijmpistool en bevestig een nieuwe mengtip. De mengtip zorgt ervoor dat de twee componenten van de polyurethaanlijm in de juiste verhouding worden dozóeerd.

Blok aanbrengen

Gebruik het Walkease Glue Dispenser Gun en begin met het aanbrengen van lijm op het houten blok. Zorg ervoor dat beide componenten gelijkmatig stromen.



BELANGRIJK: Breng het blok direct na het mengen aan en positioneer het, omdat de lijm ongeveer 12 seconden na het mengen begint uit te harden.

Breng ongeveer 20 ml van de gemengde lijm aan in een continu zigzagpatroon over het hele blok om een gelijkmatige dekking te garanderen wanneer het op de hoof wordt gedrukt, vooral rond de randen (zie figuur 4 hieronder).

Druk het blok stevig op de gezonde klauw en zorg ervoor dat het correct is uitgelijnd en dat de lijm zich verspreidt over het volledige oppervlak van het blok. Houd gedurende ongeveer 30 seconden stevige druk aan.

De volledige hechtsterkte ontwikkelt zich terwijl de lijm uithardt en wordt na ongeveer 90 seconden volledig belastbaar, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Laat de voet na uitharding voorzichtig zakken zodat het dier gewicht op het blok kan plaatsen.

Walkease houten blokken zijn ontworpen om op natuurlijke wijze te slijten en laten meestal los naarmate de hoof groeit, maar kunnen verwijderd moeten worden als ze niet vanzelf afslijten.

Blokken mogen niet langer dan 35 dagen op een klauw blijven zitten.

Wij adviseren het gebruik van Walkease 2-componentenlijm en Walkease Glue Dispenser Gun in combinatie met houten blokken voor optimale prestaties.

Let op: bij koude omstandigheden kan de uithardingstijd variëren. Bewaar de cartridges vóór gebruik op kamertemperatuur om de vloeï en uitharding te verbeteren.

Fig 1. Behandel de beschadigde klauw indien nodig.

Fig 2. Breng ongeveer 20 ml van de gemengde lijm aan in een doorlopend zigzagpatroon over het blok om een gelijkmatige dekking te garanderen.

Fig 3. Zorg voor volledige dekking en dat het blok correct is uitgelijnd met de klauw-as vóór plaatsing.

Fig 4. Druk het blok stevig op de gezonde klauw. Houd ongeveer 30 seconden stevige druk aan.

Fig 5. Het Walkease houten blok is na ongeveer 90 seconden volledig belastbaar. Laat daarna het been voorzichtig zakken zodat het rund gewicht op het blok kan plaatsen.

Extra houten blokken, mengtips en 2-componentenlijm kunnen worden besteld via uw Shoof-dealer.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Walkease treklosser er en del av Walkease klauvpleiesystem og gir pålitelig, langsiktig avlastning og løft av klauven ved moderat halthet, når det er behov for holdbarhet og utvidet støtte.

Walkease treklosser har et rutemønster som er utviklet for bruk med Walkease 2-komponentlim, vårt patenterte polyuretanbaserte lim. Dette rutemønsteret bidrar til å redusere skjærkrefter når kua vrir eller snur seg, slik at limet kan fordele seg jevnt og danne en sterk, sammenlåst binding med klauven.

Montering av Walkease treklosser

Riktig forberedelse og påføring er avgjørende for å sikre maksimal bindingsstyrke og at kllossene sitter godt.

Behandle den berørte klauven

Beskjør og behandle den halte klauven. Riktig klauvforberedelse er avgjørende.

Forbered den friske klauven

Rengjør den friske (vektbærende) klauven grundig. Overflaten på den friske klauven skal være ren og tørr for å sikre effektiv binding. Utilstrekkelig tørking kan føre til dårlig vedheft.

Påføring av Walkease 2-komponentlim

Sett Walkease 2-komponentlimpatronen inn i Walkease limpistol og fest en ny blandespiss. Blandespissen sikrer at de to komponentene i polyuretanlimet doseres i riktig forhold.

Påføring av blokk

Ved bruk av Walkease limdispenserpistol, begynn å påføre lim på treblokken. Sørg for at begge komponentene flyter jevnt.



VIKTIG: Påfør og plasser blokken umiddelbart etter blanding, da limet begynner å herde omtrent 12 sekunder etter at det er blandet.

Påfør omtrent 20 ml av det blendede limet i et kontinuerlig siksakkmønster over blokken for å sikre jevn dekning når den presses mot klauven, spesielt rundt kantene (se fig. 4 nedenfor).

Press blokken godt fast på den friske klauven, og sørg for at den er riktig justert og at limet sprer seg slik at hele blokkens overflate dekkes. Oppretthold et fast trykk i omtrent 30 sekunder.

Full bindingsstyrke utvikles når limet herder og blir fullt belastningsbærende etter omtrent 90 sekunder, avhengig av omgivelsestemperaturen.

Når det har satt seg, senk foten forsiktig slik at dyret kan legge vekt på blokken.

Walkease treblokker er utformet for å slites naturlig og løsner vanligvis etter hvert som klauven vokser, men kan måtte fjernes dersom de ikke slites av av seg selv. Blokkene bør ikke sitte på klauven i mer enn 35 dager.

For best ytelse anbefaler vi å bruke Walkease 2-komponent lim og Walkease Glue Dispenser Gun sammen med treklosser.

Merk: Under kalde forhold kan herdetiden variere. Oppbevar patronene i romtemperatur før bruk for å forbedre flyt og herding.

Fig. 1. Behandle den skadde klauven etter behov.

Fig. 2. Påfør ca. 20 ml av det blendede limet i et kontinuerlig siksakkmønster over blokken for å sikre jevn dekning.

Fig. 3. Sørg for full dekning og at blokken er riktig justert med klauens akse før montering.

Fig. 4. Press blokken godt mot den friske klauven. Oppretthold fast trykk i ca. 30 sekunder.

Fig. 5. Walkease treblokk blir fullt belastningsbærende etter ca. 90 sekunder. Når den er herdet, senk benet forsiktig slik at storfeet kan legge vekt på blokken.

Ekstra treklosser, blandetips og 2-komponent lim kan bestilles gjennom din Shooof-forhandler.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Drewniane bloczki Walkease są częścią systemu pielęgnacji racic Walkease i zapewniają niezawodne, długoterminowe uniesienie racicy w przypadku umiarkowanej kulawizny, gdy wymagane są trwałość i długotrwałe wsparcie.

Drewniane bloczki Walkease posiadają wzór siatki zaprojektowany do użycia z dwuskładnikowym klejem Walkease, naszym opatentowanym klejem poliuretanowym. Taka konstrukcja siatki pomaga zmniejszyć siły ścinające, gdy krowa się skręca lub obraca, umożliwiając równomierne rozprowadzenie kleju i utworzenie mocnego, zasebniającego się połączenia z racicą.

Montaż drewnianych bloczków Walkease

Prawidłowe przygotowanie i aplikacja są kluczowe dla zapewnienia maksymalnej siły wiązania oraz trwałego utrzymania bloczków.

Leczenie chorej racicy

Przytnij i poddać leczeniu kulawą racicę. Prawidłowe przygotowanie racicy jest niezbędne.

Przygotowanie zdrowej racicy

Dokładnie oczyść zdrową (nośną) racicę. Powierzchnia zdrowej racicy powinna być czysta i sucha, aby zapewnić skuteczne wiązanie. Niewystarczające wysuszenie może prowadzić do słabej przyczepności.

Aplikacja dwuskładnikowego kleju Walkease

Włóż kartusz z dwuskładnikowym klejem Walkease do pistoletu dozującego Walkease i zamocuj nową końcówkę mieszającą. Końcówka

mieszająca zapewni dozowanie dwóch składników kleju poliuretanowego w odpowiednich proporcjach.

Nakładanie bloku

Używając pistoletu do aplikacji kleju Walkease Glue Dispenser Gun, rozpocznij nakładanie kleju na drewniany blok. Upewnij się, że oba składniki przepływają równomiernie.



WAŻNE: Nałóż i ustaw blok natychmiast po wymieszaniu, ponieważ klej zaczyna utwardzać się około 12 sekund po zmieszaniu.

Nałóż około 20 ml zmieszanego kleju w ciągłym wzorze zygzakowatym na całą powierzchnię bloku, aby zapewnić równomierne pokrycie po docięściu do kopyta, szczególnie na krawędziach (patrz rys. 4 poniżej).

Mocno dociśnij blok do zdrowego pazura, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony, a klej rozprowadza się tak, aby pokrył całą powierzchnię bloku. Utrzymuj stały nacisk przez około 30 sekund.

Pełna wytrzymałość wiązania rozwija się w miarę utwardzania kleju i osiąga pełną nośność po około 90 sekundach, w zależności od temperatury otoczenia.

Po związaniu delikatnie opuść nogę, aby zwierzę mogło przenieść ciężar na blok.

Drewniane bloki Walkease są zaprojektowane tak, aby naturalnie się zużywały i zwykle odpadają w miarę wzrostu kopyta, jednak mogą wymagać usunięcia, jeśli nie zużywają się samoczynnie. Bloki nie powinny pozostawać na pazurze dłużej niż 35 dni.

Zalecamy stosowanie kleju dwuskładnikowego Walkease oraz Walkease Glue Dispenser Gun wraz z drewnianymi blokami w celu uzyskania najlepszej wydajności.

Uwaga: w warunkach niskiej temperatury czas wiązania może się różnić. Przed użyciem przechowuj kartridże w temperaturze pokojowej, aby poprawić przepływ i utwardzanie.

Rys. 1 W razie potrzeby należy odpowiednio opatrzyć uszkodzony racicę/pazur.

Rys. 2 Nałóż około 20 ml zmieszanego kleju w ciągłym wzorze zygzakowatym na całą powierzchnię bloku, aby zapewnić równomierne pokrycie.

Rys. 3 Przed umieszczeniem upewnij się, że pokrycie jest pełne, a blok jest prawidłowo ustawiony względem osi racicy.

Rys. 4 Mocno docisnąć blok do zdrowej racicy. Utrzymywać stały, silny nacisk przez około 30 sekund.

Rys. 5 Drewniany blok Walkease osiąga pełną nośność po około 90 sekundach. Po związaniu delikatnie opuścić nogę, aby było mogło przenieść ciężar na blok.

Dodatkowe drewniane bloki, końcówki mieszające oraz klej dwuskładnikowy można zamówić u swojego dystrybutora ShooF.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Os blocos de madeira Walkease fazem parte do sistema de cuidados de cascos Walkease, oferecendo uma elevação confiável e de longo prazo do casco em casos de claudicação moderada, quando durabilidade e suporte prolongado são necessários.

Os blocos de madeira Walkease apresentam um padrão em grade, desenvolvendo para uso com a cola Walkease de 2 componentes, nosso adesivo de poliuretano patenteado. Esse design em grade ajuda a reduzir as forças de cisalhamento quando a vaca gira ou se vira, permitindo que o adesivo se distribua uniformemente e forme uma ligação forte e intertravada com o casco.

Aplicação dos blocos de madeira Walkease

A preparação e aplicação corretas são essenciais para garantir a máxima força de adesão e a fixação dos blocos.

Tratar o casco afetado

Aparar e tratar o casco com claudicação. A preparação adequada do casco é essencial.

Preparar o casco saudável

Limpar completamente o casco saudável (de suporte de peso). A superfície do casco saudável deve estar limpa e seca para garantir uma adesão eficaz. A secagem inadequada pode levar a uma má aderência.

Aplicação da cola Walkease de 2 componentes

Inserir o cartucho da cola Walkease de 2 componentes na pistola aplicadora Walkease e acoplar uma nova ponteira misturadora. A ponteira misturadora garante que os dois componentes do adesivo de

poliuretano sejam dispensados na proporção correta.

Aplicação do bloco

Utilizando a pistola aplicadora de cola Walkease, comece a aplicar a cola no bloco de madeira. Certifique-se de que ambos os componentes fluem de forma uniforme.



IMPORTANTE: Aplique e posicione o bloco imediatamente após a mistura, pois o adesivo começa a curar aproximadamente 12 segundos após ser misturado.

Aplique aproximadamente 20 mL do adesivo misturado em um padrão contínuo em zigue-zague sobre o bloco para garantir uma cobertura uniforme quando pressionado contra o casco, especialmente nas bordas (ver Fig. 4 abaixo).

Pressione o bloco firmemente contra a unha saudável, garantindo que esteja corretamente alinhado e que a cola se espalhe para cobrir toda a superfície do bloco. Mantenha pressão firme por aproximadamente 30 segundos.

A resistência total da ligação se desenvolve à medida que o adesivo cura e se torna totalmente capaz de suportar carga em aproximadamente 90 segundos, dependendo da temperatura ambiente.

Após a fixação, abaixe suavemente o pé, permitindo que o animal coloque peso sobre o bloco.

Os blocos de madeira Walkease são projetados para se desgastarem naturalmente e normalmente se soltam à medida que o casco cresce, mas podem precisar ser removidos caso não se desgastem naturalmente. Os blocos não devem permanecer no casco por mais de 35 dias.

Recomendamos o uso da Walkease 2-Part Glue e da pistola aplicadora Walkease Glue Dispenser Gun com blocos de madeira para melhor desempenho.

Nota: Em condições de frio, o tempo de adesão pode variar. Armazene os cartuchos à temperatura ambiente antes do uso para melhorar o fluxo e a cura.

Fig 1. Tratar a unha/garra lesionada conforme necessário.

Fig 2. Aplicar aproximadamente 20 mL do adesivo misturado em um padrão contínuo em zigue-zague sobre o bloco para garantir cobertura uniforme.

Fig 3. Garantir cobertura total e que o bloco esteja corretamente alinhado com o eixo da garra antes da aplicação.

Fig 4. Pressionar firmemente o bloco contra a garra saudável. Manter pressão firme por aproximadamente 30 segundos.

Fig 5. O bloco de madeira Walkease torna-se totalmente capaz de suportar carga em aproximadamente 90 segundos. Após a fixação, baixar suavemente a perna para que o animal possa colocar peso sobre o bloco.

Blocos de madeira adicionais, pontas de mistura e cola bicomponente podem ser encomendados através do seu revendedor Shooof.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Деревянные блоки Walkease являются частью системы ухода за копытами Walkease и обеспечивают надежное, долгосрочное приподнимание копыта при умеренной хромоте, когда требуется долговечность и длительная поддержка.

Деревянные блоки Walkease имеют решетчатую структуру, разработанную для использования с двухкомпонентным клеем Walkease — нашим запатентованным полиуретановым клеем. Такая решетчатая конструкция помогает уменьшить сдвиговые нагрузки, когда корова поворачивается или делает разворот, позволяя клею равномерно распределяться и образовывать прочное, взаимосвязанное соединение с копытом.

Установка деревянных блоков Walkease

Правильная подготовка и нанесение имеют решающее значение для обеспечения максимальной прочности сцепления и надежной фиксации блоков.

Обработка пораженного копыта

Обрежьте и обработайте пораженное (хромающее) копыто. Правильная подготовка копыта является обязательной.

Подготовка здорового копыта

Тщательно очистите здоровое (несущее нагрузку) копыто. Поверхность здорового копыта должна быть чистой и сухой для обеспечения эффективного склеивания. Недостаточное высыхание может привести к плохой адгезии.

Нанесение двухкомпонентного клея Walkease

Вставьте картридж с двухкомпонентным клеем Walkease в пистолет-дозатор Walkease и установите новый смесительный наконечник. Смесительный наконечник обеспечивает подачу двух компонентов полиуретанового клея в правильной пропорции.

Нанесение блока

Используя пистолет-дозатор клея Walkease Glue Dispenser Gun, начните наносить клей на деревянный блок. Убедитесь, что оба компонента подаются равномерно.



ВАЖНО: Наносите и устанавливайте блок сразу после смешивания, так как клей начинает отверждаться примерно через 12 секунд после смешивания.

Нанесите примерно 20 мл смешанного клея непрерывным зигзагообразным узором по всему блоку, чтобы обеспечить равномерное покрытие при прижатии к копыту, особенно по краям (см. рис. 4 ниже).

Плотно прижмите блок к здоровому копыту, убедившись, что он правильно выровнен и клей равномерно распределяется по всей поверхности блока. Удерживайте сильное давление примерно 30 секунд.

Полная прочность соединения развивается по мере отверждения клея и достигает полной несущей способности примерно через 90 секунд, в зависимости от температуры окружающей среды.

После фиксации аккуратно опустите ногу, позволяя животному перенести вес на блок.

Деревянные блоки Walkease предназначены для естественного износа и обычно отсоединяются по мере роста копыта, но могут потребовать удаления, если не стираются естественным образом. Блоки не следует оставлять на копыте более 35 дней.

Рекомендуется использовать двухкомпонентный клей Walkease и Walkease Glue Dispenser Gun вместе с деревянными блоками для достижения наилучшей эффективности.

Примечание: в условиях низких температур время склеивания может изменяться. Перед использованием храните картриджи при комнатной температуре для улучшения текучести и отверждения.

Рисунок 1. Обработайте поврежденный копытный палец при необходимости.

Рисунок 2. Нанесите примерно 20 мл смешанного клея непрерывным зигзагообразным узором по всему блоку для равномерного покрытия.

Рисунок 3. Перед установкой убедитесь в полном покрытии и правильном выравнивании блока относительно оси копыта.

Рисунок 4. Плотно прижмите блок к здоровому копыту. Удерживайте сильное давление примерно 30 секунд.

Рисунок 5. Деревянный блок Walkease становится полностью несущим нагрузку примерно через 90 секунд. После фиксации аккуратно опустите ногу, чтобы животное могло опереться на блок.

Дополнительные деревянные блоки, насадки для смешивания и двухкомпонентный клей можно заказать у вашего дилера Shooof.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Walkease-puupalikat ovat osa Walkease-sorkanhoitojärjestelmää ja tarjoavat luotettavan, pitkäkestoisen sorkan kohotuksen keskivaikeassa ontumissessa, kun tarvitaan kestävyyttä ja pidempiaikaista tukea.

Walkease-puupalikoissa on ristikkokuviointi, joka on suunniteltu käytettäväksi Walkease 2-komponenttiliiman kanssa – tämä on patentoitu polyuretaaniliimamme. Tämä ristikkorakenne auttaa vähentämään leikkausvoimia, kun lehmä kääntyy tai kiertyy, jolloin liima leviää tasaisesti ja muodostaa vahvan, lukkiutuvan sidoksen sorkkaan.

Walkease-puupalikoiden kiinnitys

Oikea valmistelu ja käyttö ovat välttämättömiä maksimaalisen liimauksen lujuuden ja palikan pysyvyyden varmistamiseksi.

Käsittele vaurioitunut sorkka

Vuole ja hoida ontuva sorkka. Oikea sorkan valmistelu on olennaista.

Valmistele terve sorkka

Puhdista terve (painoa kantava) sorkka huolellisesti. Terveen sorkan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva tehokkaan kiinnittymisen varmistamiseksi. Riittämätön kuivaus voi johtaa heikkoon tartuntaan.

Walkease 2-komponenttiliiman käyttö

Aseta Walkease 2-komponenttiliiman patruuna Walkease-liimapistooliin ja kiinnitä uusi sekoituskärki. Sekoituskärki varmistaa, että polyuretaaniliiman kaksi komponenttia annostellaan oikeassa suhteessa.

Blokin kiinnitys

Käytä WWalkease-liimapistoolia ja aloita liiman levittäminen puublokkiin. Varmista, että molemmat komponentit virtaavat tasaisesti.



TÄRKEÄÄ: Levitä ja aseta blokki paikalleen välittömästi sekoittamisen jälkeen, sillä liima alkaa kovettua noin 12 sekunnin kuluttua sekoittamisesta.

Levitä noin 20 ml sekoitettua liimaa jatkuvana siksak-kuviona blokin pinnalle varmistaaksesi tasaisen peiton, kun se painetaan kaviota vasten, erityisesti reunoilla (katso kuva 4 alla).

Paina blokki tiukasti tervettä sorkkaa vasten varmistaen, että se on oikein kohdistettu ja että liima leviää koko blokin pinnalle. Pidä tasainen paine noin 30 sekunnin ajan.

Täysi liimauslujuus kehittyy liiman kovettuessa, ja se saavuttaa täyden kuormituskestävyyden noin 90 sekunnissa ympäristön lämpötilasta riippuen.

Kun liima on kovettunut, laske jalka varovasti alas, jotta eläin voi asettaa painonsa blokin päälle.

Walkease-puublokkit on suunniteltu kulumaan luonnollisesti, ja ne irtoavat yleensä sorkan kasvaessa, mutta ne voidaan joutua poistamaan, jos ne eivät kulu itsestään. Blokkia ei tule

pitää sorkassa yli 35 päivää.

Suosittelemme käyttämään Walkease 2-komponenttista liimaa sekä Walkease Glue Dispenser Gun -liimapistoolia puupalojen kanssa parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Huomio: kylmissä olosuhteissa kiinnittymisaika voi vaihdella. Säilytä patruunat huoneenlämmössä ennen käyttöä virtaavuuden ja kovettumisen parantamiseksi.

Kuva 1. Hoida vaurioitunut sorkka tarpeen mukaan.

Kuva 2. Levitä noin 20 ml sekoitettua liimaa jatkuvana siksak-kuviona koko palan alueelle tasaisen peiton varmistamiseksi.

Kuva 3. Varmista täydellinen peitto ja että pala on oikein kohdistettu sorkan akselin kanssa ennen asettamista.

Kuva 4. Paina pala tiukasti tervettä sorkkaa vasten. Pidä tasainen, vahva paine noin 30 sekunnin ajan.

Kuva 5. Walkease-puupala saavuttaa täyden kuormituskestävyyden noin 90 sekunnissa. Kiinnityksen jälkeen laske jalka varovasti alas, jotta nauta voi asettaa painon palalle.

Lisäpuupalat, sekoituskärjet ja 2-komponenttinen liima ovat tilattavissa Shoof-jälleenmyyjältäsi.



Walkease träblock är en del av Walkease klövvårdssystem och ger en tillförlitlig, långvarig höjning av klöven vid måttlig halta, när hållbarhet och förlängd stöd krävs.

Walkease träblock har ett rutmönster som är utformat för användning med Walkease 2-komponentslim, vårt patenterade polyuretanlim. Detta rutmönster bidrar till att minska skjuvkrakter när kon vrider sig eller vänder, vilket gör att limmet kan fördelas jämnt och bilda en stark, sammanlåsande bindning med klöven.

Montering av Walkease träblock

Korrekt förberedelse och applicering är avgörande för att säkerställa maximal bindningsstyrka och att blocken sitter kvar ordentligt.

Behandla den påverkade klöven

Verka och behandla den halta klöven. Korrekt klövförberedelse är avgörande.

Förbered den friska klöven

Rengör den friska (bärande) klöven noggrant. Ytan på den friska klöven ska vara ren och torr för att säkerställa effektiv vidhäftning. Otillräcklig torkning kan leda till dålig vidhäftning.

Applicering av Walkease 2-komponentslim

Sätt in patronen med Walkease 2-komponentslim i Walkease limdispenserpistol och fäst en ny blandningsspets. Blandningsspetsen säkerställer att de två komponenterna i polyuretanlimmet doseras i rätt proportion.

Applicera blocket

Använd Walkease Glue Dispenser Gun och börja applicera lim på träblocket. Se till att båda komponenterna flyter jämnt.



VIKTIGT: Applicera och placera blocket omedelbart efter blandning, eftersom limmet börjar härdas cirka 12 sekunder efter att det har blandats.

Applicera cirka 20 ml av det blandade limmet i ett kontinuerligt sicksackmönster över hela blocket för att säkerställa jämn täckning när det pressas mot klöven, särskilt runt kanterna (se figur 4 nedan).

Tryck fast blocket ordentligt mot den friska klöven och säkerställ att det är korrekt inriktat och att limmet sprids så att hela blockets yta täcks. Håll ett fast tryck i cirka 30 sekunder.

Full bindningsstyrka utvecklas när limmet härdar och blir fullt belastningsbärande efter cirka 90 sekunder, beroende på omgivningstemperaturen.

När det har härdat, sänk försiktigt ner foten så att djuret kan lägga vikt på blocket.

Walkease träblock är utformade för att slitas naturligt och lossnar vanligtvis när klöven växer, men kan behöva tas bort om de inte slits av naturligt. Block ska inte lämnas på en klöv längre än 35 dagar.

Vi rekommenderar att använda Walkease 2-komponentslim och

Walkease Glue Dispenser Gun tillsammans med träklossar för bästa prestanda.

Observera: Vid kalla förhållanden kan bindningstiden variera. Förvara patroner i rumstemperatur före användning för att förbättra flöde och härdning.

- Fig 1. Behandla den skadade klöven enligt behov.
- Fig 2. Applicera cirka 20 ml av det blandade limmet i ett kontinuerligt sicksackmönster över hela klossen för att säkerställa jämn täckning.
- Fig 3. Säkerställ full täckning och att klossen är korrekt inriktad med klövens axel innan applicering.
- Fig 4. Tryck fast klossen ordentligt mot den friska klöven. Håll ett stadigt tryck i cirka 30 sekunder.
- Fig 5. Walkease träkloss blir fullt belastningsbärande efter cirka 90 sekunder. När den har härdat, sänk försiktigt ner benet så att nötkreaturet kan lägga vikt på klossen.

Ytterligare träklossar, blandningsspetsar och 2-komponentslim kan beställas via din Shoof-återförsäljare.

Fig.

1



Fig.

2



Fig.

3



Fig.

4



Fig.

5



Walkease Ahşap Bloklar, Walkease toynak bakım sisteminin bir parçasıdır ve orta dereceli topallık durumlarında, dayanıklılık ve uzun süreli destek gerektiğinde güvenilir ve uzun vadeli toynak yükseltmesi sağlar.

Walkease Ahşap Bloklar, patentli poliüretan yapıştırıcımız olan Walkease 2 Bileşenli Yapıştırıcı ile kullanılmak üzere tasarlanmış izgara desenine sahiptir. Bu izgara tasarımı, inek döndüğünde veya yön değiştirdiğinde oluşan kesme kuvvetlerini azaltmaya yardımcı olur; böylece yapıştırıcının eşit şekilde yayılmasını ve toynak ile güçlü, kilitlenmiş bir bağ oluşturmasını sağlar.

Walkease Ahşap Blokların Uygulanması

Maksimum yapışma gücü ve blokların sağlam şekilde tutunmasını sağlamak için doğru hazırlık ve uygulama şarttır.

Etkilenen toynağın tedavisi

Topal toynağı kesin ve tedavi edin. Doğru toynak hazırlığı çok önemlidir.

Sağlıklı toynağın hazırlanması

Sağlıklı (ağırlık taşıyan) toynağı iyice temizleyin. Etkili bir yapışma için sağlıklı toynağın yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Yetersiz kurutma zayıf yapışmaya neden olabilir.

Walkease 2 Bileşenli Yapıştırıcının uygulanması

Walkease 2 Bileşenli Yapıştırıcı kartuşunu Walkease yapıştırıcı tabancasına yerleştirin ve yeni bir karıştırma ucu takın. Karıştırma ucu, poliüretan yapıştırıcının iki bileşeninin doğru oranda karıştırılarak uygulanmasını sağlar.

Bloğu uygulayın

Walkease Glue Dispenser Gun kullanarak, ahşap bloğa yapıştırıcı uygulamaya başlayın. Her iki bileşenin de eşit şekilde akmasını sağlayın.



ÖNEMLİ: Yapıştırıcı karıştırıldıktan yaklaşık 12 saniye sonra kürlenmeye başladığından, bloğu karıştırma işleminin hemen ardından uygulayın ve doğru şekilde konumlandırın.

Karıştırılmış yapıştırıcıdan yaklaşık 20 mL alın ve bloğun üzerine sürekli zikzak bir desen halinde uygulayın. Böylece, toynağa bastırıldığında özellikle kenarlar dahil olmak üzere eşit bir kaplama sağlanır (aşağıdaki Şekil 4'e bakınız).

Bloğu sağlıklı tırnağa sıkıca bastırın, doğru hizalandığından ve yapıştırıcının tüm blok yüzeyine yayıldığından emin olun. Yaklaşık 30 saniye boyunca sıkı basınç uygulamaya devam edin.

Yapıştırıcı kürlendikçe tam bağlanma gücü oluşur ve ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 90 saniye içinde tamamen yük taşıyabilir hale gelir.

Sabitlendikten sonra, hayvanın bloğun üzerine ağırlık verebilmesi için ayağı nazikçe indirin.

Walkease ahşap bloklar doğal olarak aşınacak şekilde

tasarlanmıştır ve genellikle tırnak büyüdükçe kendiliğinden ayrılır, ancak doğal olarak aşınmazlarsa çıkarılmaları gerekebilir. Bloklar bir tırnak üzerinde 35 günden fazla bırakılmamalıdır.

En iyi performans için Walkease 2 Bileşenli Yapıştırıcı ve Walkease Glue Dispenser Gun ürününün ahşap bloklarla birlikte kullanılmasını öneriyoruz.

Not: Soğuk koşullarda yapışma süresi değişebilir. Akış ve kürlenmeyi iyileştirmek için kartuşları kullanmadan önce oda sıcaklığında saklayın.

Şekil 1. Yaralı tırnağı gerektiği şekilde tedavi edin.

Şekil 2. Karıştırılmış yapıştırıcıdan yaklaşık 20 mL'yi, bloğun üzerine sürekli zigzag bir desen halinde uygulayarak eşit kaplama sağlayın.

Şekil 3. Yerleştirmeden önce tam kaplama sağlandığından ve bloğun tırnak eksenile doğru hizalandığından emin olun.

Şekil 4. Bloğu sağlıklı tırnağa sıkıca bastırın. Yaklaşık 30 saniye boyunca sabit ve güçlü basınç uygulayın.

Şekil 5. Walkease ahşap blok yaklaşık 90 saniye içinde tamamen yük taşıyabilir hale gelir. Sabitlendikten sonra, hayvanın blok üzerine ağırlık vermesi için bacağı yavaşça indirin.

Ek ahşap bloklar, karıştırma uçları ve 2 bileşenli yapıştırıcı Shooof bayiniz aracılığıyla sipariş edilebilir.

